

YS600-YS800



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Cavitation

Une mise en forme sûre et efficace

MANUEL DE L'UTILISATEUR YS600-YS800

Français

Félicitations, nous aimerions tout d'abord vous remercier d'avoir acheté CELL CONTOUR et pour la confiance que vous nous accordez. Grâce à ce manuel d'utilisation pratique et en suivant ses instructions simples, vous obtiendrez des résultats comparables à ceux obtenus avec les mains d'une esthéticienne professionnelle.

Nous vous recommandons fortement de lire attentivement ce manuel d'utilisation, en le lisant et en le comprenant, cela vous aidera à utiliser CELL CONTOUR de manière efficace et sûre.

CONTENU

Chapitre 1

- Le contenu de la boîte.
- Assemblage CELL CONTOUR.

Chapitre 2

- Caractéristiques de base de CELL CONTOUR.
- Mode d'emploi.

Chapitre 3

- Modes d'application.

Chapitre 4

- Utilisation correcte et sûre de CELL CONTOUR.

Chapitre 5

- Foire aux questions sur CELL CONTOUR.

Chapitre 6

- Consignes de sécurité importantes.
- Garantie.
- Certificats.
- Liste des pièces.
- Spécifications techniques.

Chapitre 1

CONTENU DE LA BOÎTE

Dans cette boîte, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour profiter de CELL CONTOUR à partir de maintenant. Vérifiez soigneusement que le pack contient tous les éléments de la liste suivante.

YS600

1. Unité principale.
2. Support de l'unité manuelle avec vis.
3. Unité manuelle 1.
4. Câble d'alimentation.
5. Gel de cavitation.
6. Sérum tonifiant.
7. Sérum anti-cellulite.
8. Gel post-cavitation.
9. Manuel utilisateur.


Fig.1



YS800

1. Unité principale.
2. Support de l'unité manuelle avec vis.
3. Unité manuelle 1.
4. Unité manuelle 2.
5. Câble d'alimentation.
6. Gel de cavitation.
7. Sérum tonifiant.
8. Sérum anti-cellulite.
9. Gel post-cavitation.
10. Manuel utilisateur.

Fig.2

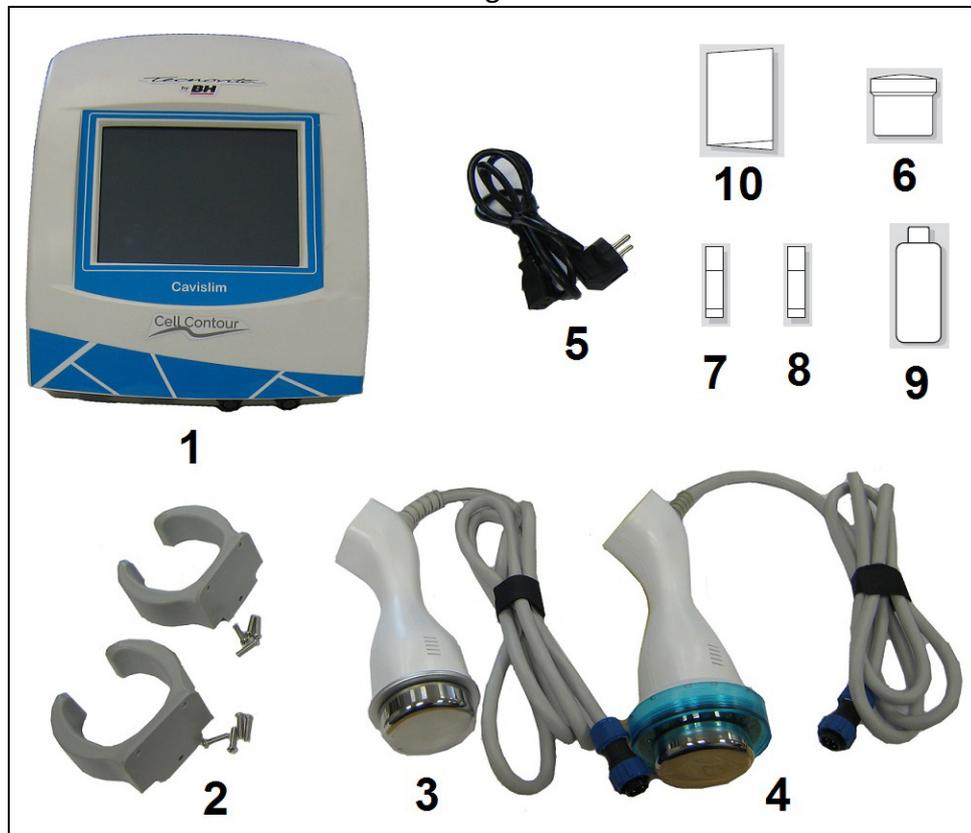


MONTAGE DE CELL CONTOUR

ASSEMBLAGE DU CELL CONTOUR

Nous allons d'abord installer le support du combiné sur l'unité principale. Pour ce faire, placez l'unité principale sur une table et positionnez le support du combiné en insérant les vis comme indiqué à la Fig. 3.

À l'aide de la clé fixe, serrez fermement les vis afin que les deux parties s'emboîtent parfaitement.

Fig.3

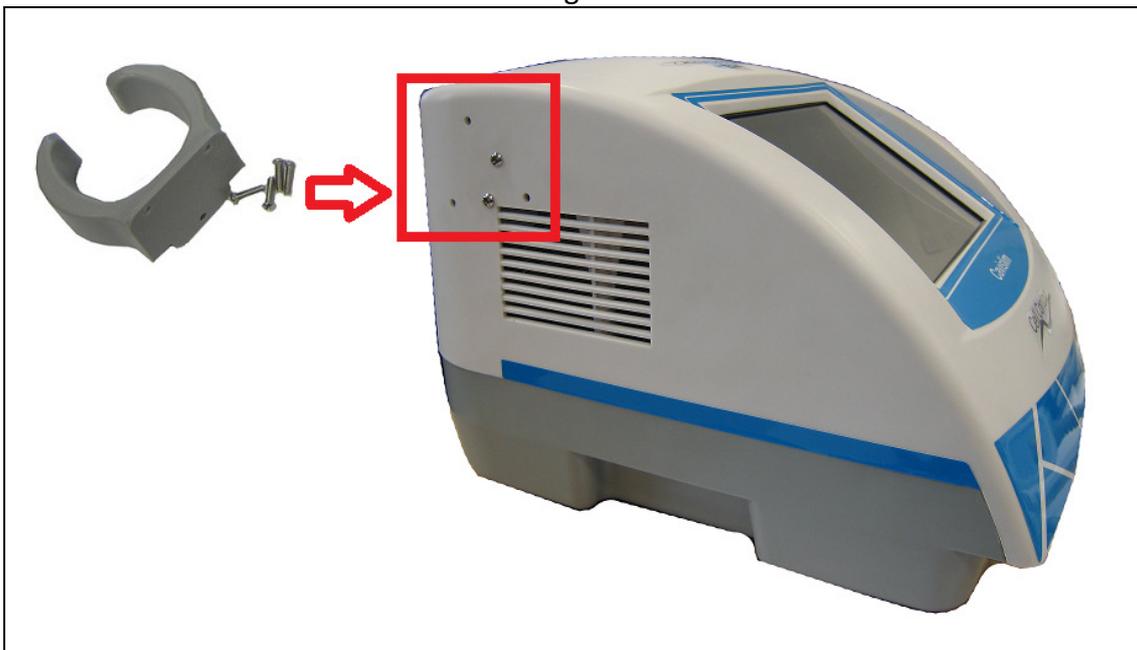

Chapitre 2

CARACTÉRISTIQUES DE BASE DU CELL CONTOUR

CELL CONTOUR est un appareil de haute technologie qui nous permet d'éliminer de manière sélective et efficace les graisses (cellulite, syndrome de la peau d'orange) de notre corps.

La technologie utilisée est celle de l'émission ultrasonore qui produit le phénomène physique appelé cavitation, entraînant l'élimination des cellules graisseuses.

Cette technologie aux résultats éprouvés est largement utilisée dans les instituts de beauté du monde entier pour lutter contre la cellulite sans douleur et sans invasion.

La fonction d'intensité contrôle la profondeur à laquelle les ondes sonores pénètrent dans votre peau. Plus l'intensité est grande, plus les vagues sont profondes.

La fonction heure vous permet de choisir combien de temps vous souhaitez travailler avec CELL CONTOUR. Pour des raisons de sécurité, la fonction de temps vous permet de choisir jusqu'à 20 minutes, ce qui correspond au temps maximum recommandé pour travailler sur une zone spécifique.

CELL CONTOUR vous permet également de choisir le mode de travail, vous aidant à sélectionner l'intervalle de temps pendant lequel les ondes atteignent votre peau.

Dans les programmes automatiques, vous pouvez régler l'intensité, le reste des fonctionnalités est déjà configuré.

Caractéristiques du modèle CELL CONTOUR Ref. YS600

Temps: Réglable de 1 à 20 minutes.
Intensité: Réglable 7 niveaux d'intensité (3,5 – 6 W/cm²)
Mode: Continu ou pulsé
Programmes: 4 programmes prédéfinis
 1 programme manuel
Combiné: 1

Caractéristiques du modèle CELL CONTOUR Ref. YS800

Temps: Réglable de 1 à 20 minutes.
Intensité: Réglable 7 niveaux d'intensité (3,5 – 6 W/cm²)
Mode: Continu ou pulsé
Programmes: 4 programmes prédéfinis
 1 programme manuel
Combiné: 2

Le modèle YS800 dispose d'un combiné supplémentaire qui combine la technologie des ultrasons avec la technologie infrarouge.

Comment la lumière infrarouge affecte-t-elle notre peau?

La lumière infrarouge favorise la production de collagène et d'élastine, rendant la peau plus ferme et plus souple. Il favorise la circulation sanguine, ce qui génère de nouvelles cellules et rend la peau plus saine et rajeunie.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU CELL CONTOUR

Précautions : Consultez votre médecin avant de commencer à utiliser cet appareil. Cet avertissement est particulièrement important pour les personnes ayant des problèmes de santé. L'utilisation par les moins de 18 ans n'est pas recommandée. Gardez cet appareil hors de portée des enfants.

Départ

Connectez l'unité manuelle (deux unités manuelles pour YS800) à l'avant de la machine.


Connectez l'unité manuelle en faisant correspondre les numéros des broches mâles avec les numéros des broches femelles (Fig. 4).

Fig.4



Fixez ensuite la connexion en tournant le fil plastique dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig.5).

Fig.5

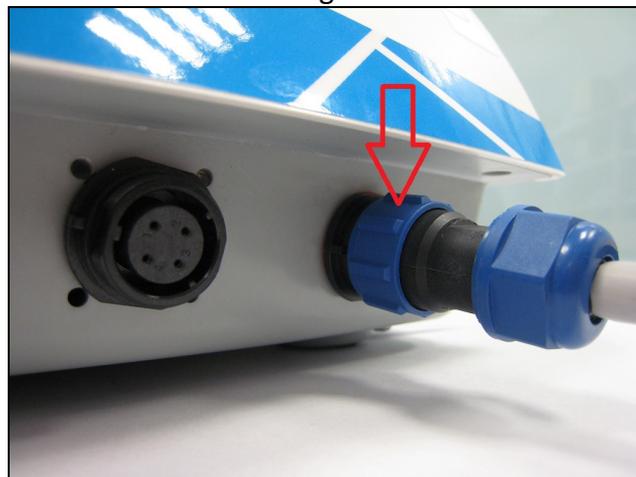

Vérifiez que toutes les connexions sont effectuées correctement avant de le connecter au secteur.


Enfin, branchez une extrémité du câble secteur dans la prise de la machine (Fig.6) et l'autre extrémité dans la prise murale électrique (220V).

Fig.6



Mettez l'interrupteur On / Off en position (I) pour démarrer la machine (Fig.7).

Fig.7

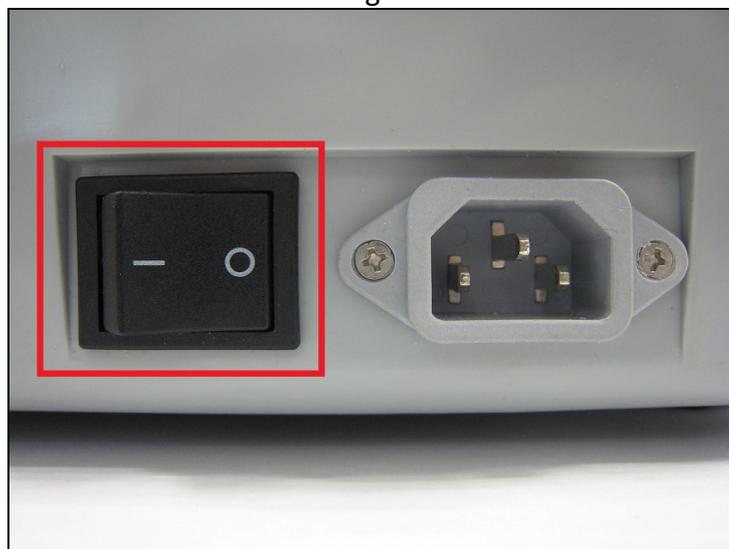


Éléments du moniteur

CELL CONTOUR dispose de una pantalla táctil de última tecnología.


YS800

Fig.8

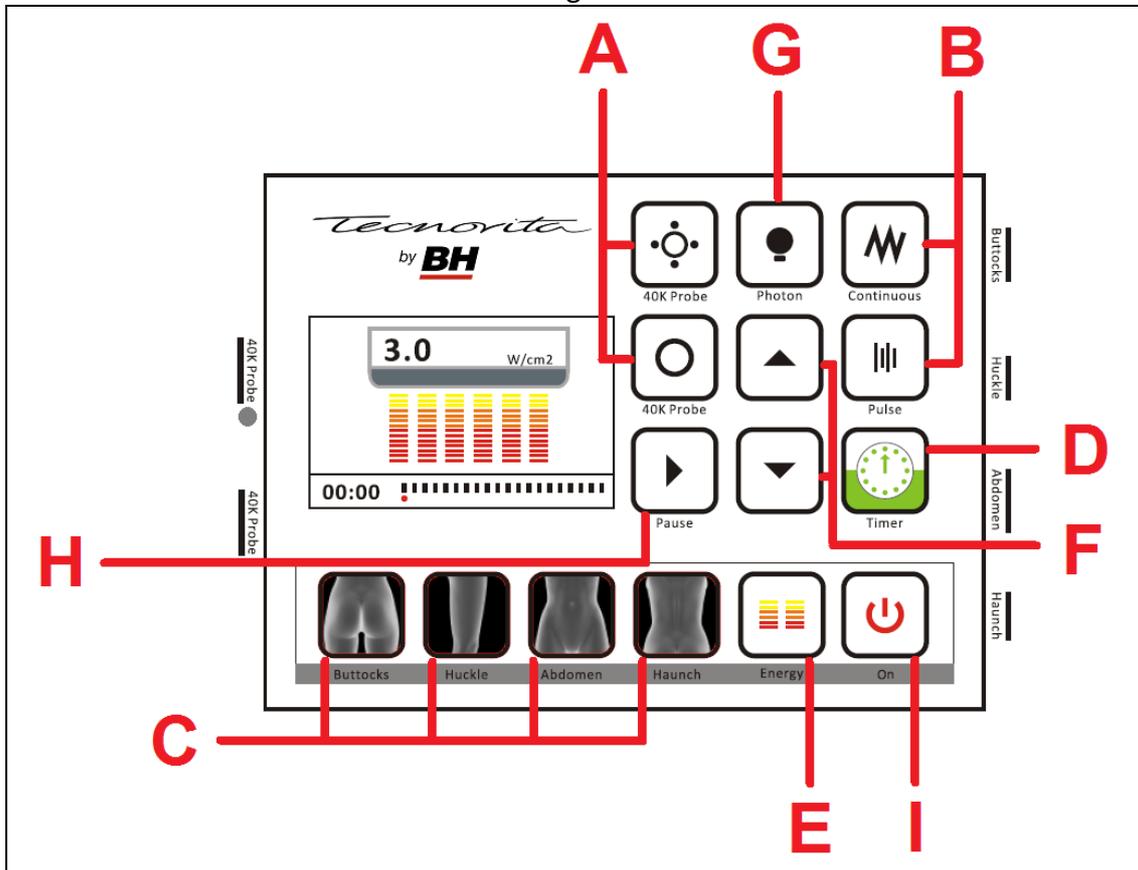

- A - Sélection de l'unité manuelle dans le programme manuel
- B - Sélection du mode (continu ou pulsé)
- C - Sélection des programmes pré-établis (fesses, huckle, abdomen, haunch)
- D - Réglage du temps
- E - Réglage de l'intensité
- F.- Réglage de l'heure / intensité après sélection du temps / de l'intensité
- G - Activer / désactiver la fonction infrarouge
- H - Pause pendant une session
- I - Début / arrêt d'une session

Fig.9

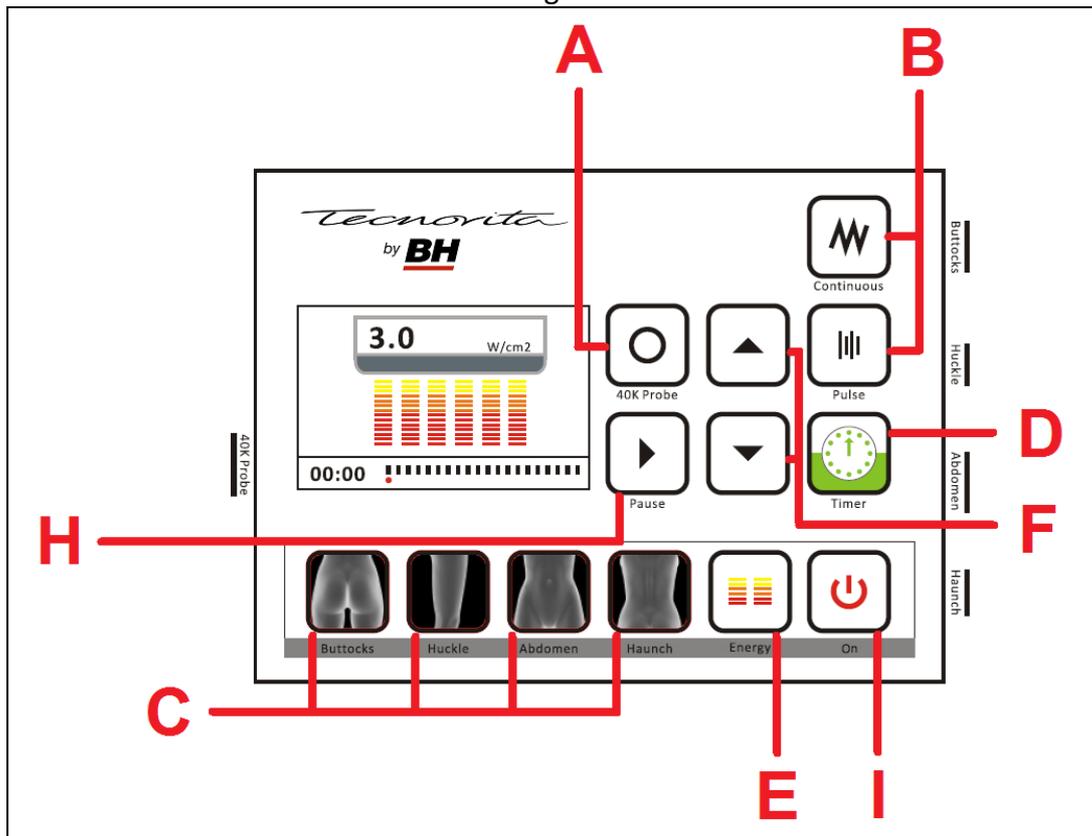

- A - Sélection de l'unité manuelle dans le programme manuel
- B - Sélection du mode (continu ou pulsé)
- C - Sélection des programmes pré-établis (fesses, huckle, abdomen, haunch)
- D - Réglage du temps
- E - Réglage de l'intensité
- F.- Réglage de l'heure / intensité après sélection du temps / de l'intensité
- H - Pause pendant une session
- I - Début / arrêt d'une session

* Si vous êtes dans le réglage temps / intensité dans le programme manuel ou le réglage de l'intensité dans le programme prédéfini, vous devez cliquer sur l'icône temps / intensité pour quitter le réglage et ensuite sélectionner d'autres fonctions.

Session de cavitation

Il y a 3 réglages pour le massage pour YS600 et 4 pour YS800:

- **Temps** : mesure la durée de la session en minutes et secondes. Vous pouvez choisir entre 1 et 20 minutes (par pas de 1 minute).

- **Mode de travail**: Type d'impulsion (fréquence d'émission d'impulsions).
CELL CONTOUR vous permet de choisir entre le mode pulsé et le mode continu.

- **Intensité**: établit le niveau d'intensité de la session.
CELL CONTOUR vous permet de choisir différents niveaux d'intensité (7 niveaux).

- **Combiné (pour YS800)**:
CELL COUNTOUR ADVANCE vous permet de choisir entre le combiné avec fonction échographie et le combiné avec fonction ultrason et infrarouge pour améliorer les résultats des séances.

Commencer une session

Une fois que vous avez branché la machine sur le secteur et que vous l'avez mise en position (I), le moniteur affichera un menu pour sélectionner la langue. Cliquez sur le drapeau de la langue souhaitée. Vous allez entrer dans l'écran de la sélection des programmes (Fig.8).

Fig.10 - YS800


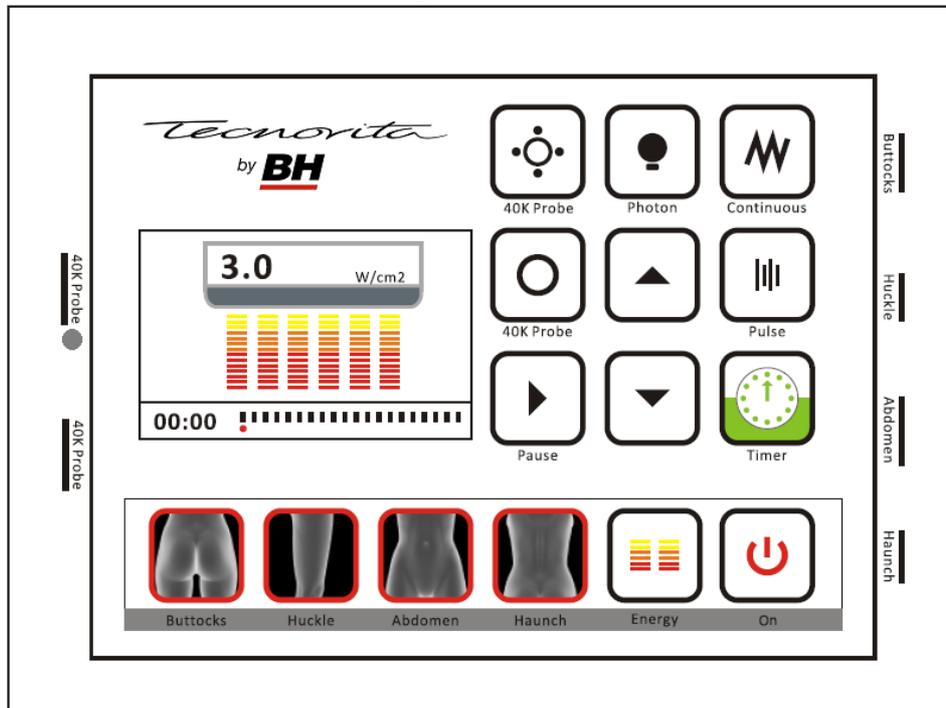


Fig.11 – YS600

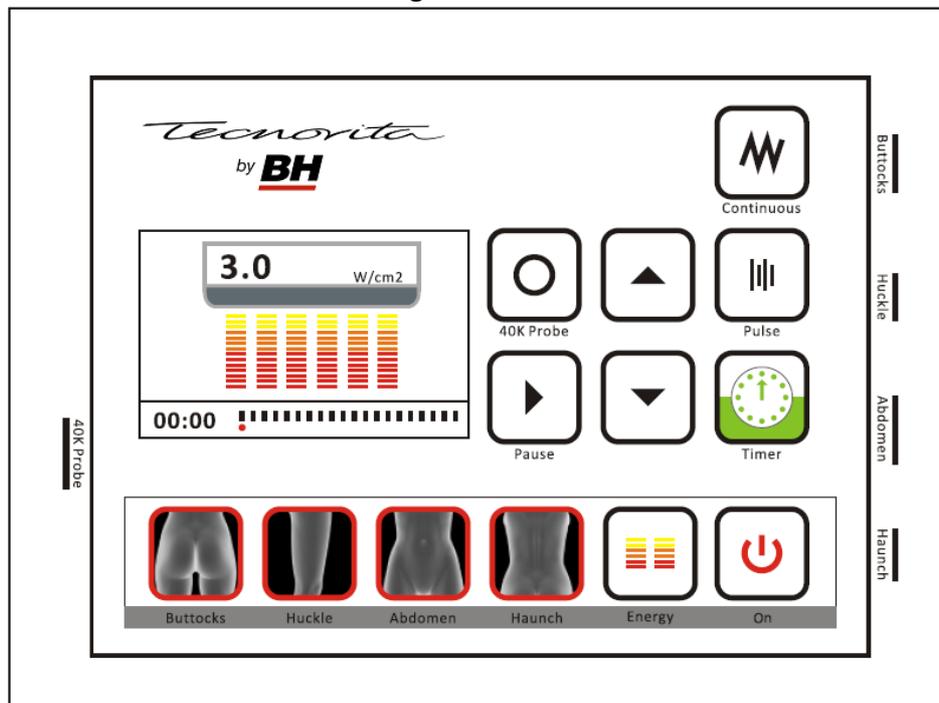

Appliquez toujours une quantité abondante de gel sur la zone que vous souhaitez travailler. Si vous devez acheter du gel ou l'une de nos crèmes, vous pouvez les trouver dans le magasin où vous avez acheté CELL CONTOUR ou sur notre site Web: www.bhfitness.com

Profils prédéfinis

CELL CONTOUR dispose de 4 profils prédéfinis conçus spécifiquement pour ces zones du corps: les fesses, le ventre, l'abdomen, la hanche. Cliquez sur l'icône de la zone que vous souhaitez travailler. Vous verrez que les valeurs prédéfinies du programme seront marquées et que l'unité manuelle sera sélectionnée. Vous pouvez modifier l'intensité en appuyant sur l'icône d'intensité (E) puis sur les boutons de réglage (F). Une fois la partie du corps sélectionnée et l'intensité ajustée (au cas où vous souhaiteriez la modifier), cliquez sur l'icône de début / fin de la session (I) pour démarrer la session de cavitation. Commencez à traiter la zone en faisant glisser l'unité manuelle lentement et sans pression, comme indiqué sur les images du chapitre Modes d'application. Vous pouvez modifier l'intensité pendant la séance de cavitation en appuyant sur l'icône de réglage de l'intensité (E).

L'appareil émet un bip toutes les 30 secondes. Si vous souhaitez interrompre la session, cliquez sur l'icône de pause (H). Pour revenir à la session, appuyez à nouveau sur l'icône de pause (H).

Lorsque le compteur d'heures atteint 0,00, l'appareil s'arrête et émet une série de bips pour vous indiquer que la session sélectionnée est terminée.

Caractéristiques des programmes prédéfinis:

Partie du corps	Infrarouge LED (YS800)	Puissance / Intensité (W/cm ²)	Temps (min)	Mode
Fesses	Si	4,5	10	Continu
Huckle	No	5	12	Continu
Abdomen	Si	5,5	8	Continu
Hanche	No	4	10	Continu

Programme manuel

Sélectionnez l'unité manuelle en cliquant sur l'icône de l'unité manuelle (A). Pour activer / désactiver la fonction DEL infrarouge (pour le YS800), cliquez sur l'icône (G) une fois que vous avez sélectionné l'unité manuelle infrarouge. Sélectionnez le mode de travail en cliquant sur (B). Ajustez l'heure en cliquant sur l'icône de temps (D) puis sur les boutons de réglage (F). Ajustez l'intensité en appuyant sur l'icône d'intensité (E) puis sur les boutons de réglage (F). Cliquez sur l'icône de démarrage / arrêt (I) pour démarrer la session. Commencez à traiter la zone en faisant glisser l'unité manuelle lentement et sans pression, comme indiqué sur les images du chapitre Modes d'application. Vous pouvez modifier l'intensité pendant la séance de cavitation en appuyant sur le réglage de l'intensité (E).

L'appareil émet un bip toutes les 30 secondes. Si vous souhaitez interrompre la session, cliquez sur l'icône de pause (H). Pour revenir à la session, appuyez à nouveau sur l'icône de pause (H).

Lorsque le compteur d'heures atteint 0,00, l'appareil s'arrête et émet une série de bips pour vous indiquer que la session sélectionnée est terminée.

Chapitre 3

Modes d'application de CELL CONTOUR

Appliquez toujours une quantité abondante de gel sur la zone que vous souhaitez travailler et commencez à la traiter en faisant glisser le combiné lentement et sans appuyer, comme indiqué sur les images.

Si vous devez acheter du gel ou l'une de nos crèmes de préparation, vous pouvez les trouver dans le magasin où vous avez acheté CELL CONTOUR ou sur notre site Web: www.bhfitness.com


Dans chacune des sections suivantes, vous trouverez un tableau avec les protocoles d'application du programme manuel. Avant de commencer à utiliser l'appareil, vous devez déterminer le niveau de graisse dans chaque zone à traiter.

- A Une grande accumulation de graisse à haute densité.
- B Accumulation importante de graisse de densité moyenne.
- C Accumulation moyenne de graisse de densité moyenne
- D Petite accumulation de graisse
- E Syndrome de peau d'orange.
- F Session de maintenance

ABDOMEN CENTRAL

Rappelez-vous de ne jamais appliquer CELL CONTOUR sur le nombril, les seins, le thorax ou les organes génitaux.

Appliquez une quantité abondante de gel sur votre abdomen et commencez à masser la zone en faisant glisser le combiné lentement et sans appuyer, comme indiqué sur les schémas.

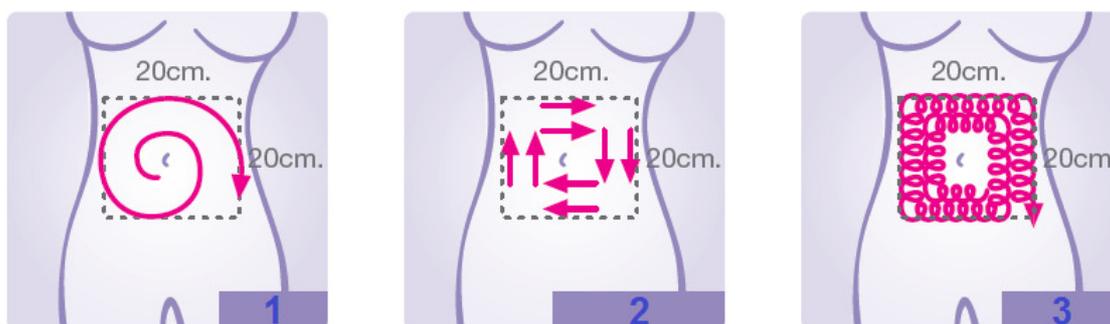


Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'appliquer CELL CONTOUR en combinant différentes techniques de massage (1 spirale, 2 croisements, 3 circulaires) dans différentes sessions.

Nous vous recommandons de vous allonger pour une application CELL CONTOUR plus confortable.

Niveau	Mode	LED (YS800)	Intensité	Temps
A	Continu	No	5,5	10'
B	Continu	No	5,5	10'
C	Pulsé	Oui	5,5	8'
D	Pulsé	Oui	4	8'
E	Pulsé	Oui	4	8'
F	Pulsé	Oui	3,5	8'

CÔTÉS

Appliquer le gel sur la zone à travailler en utilisant CELL CONTOUR.

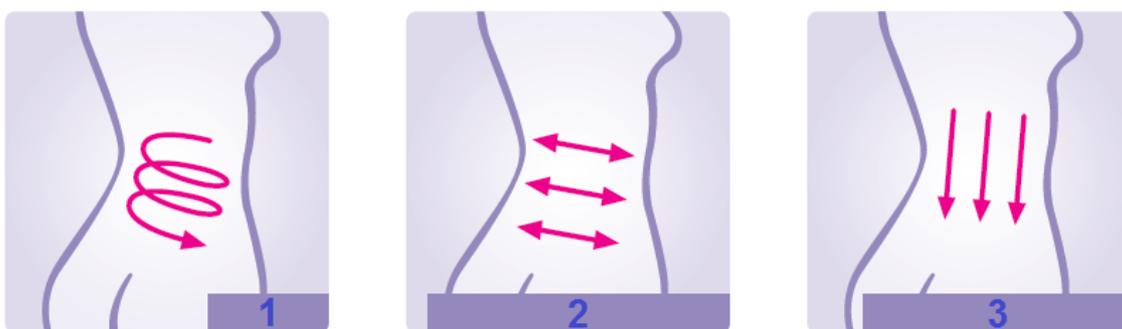


Les mouvements de massage circulaires (1) et longitudinaux (2,3) doivent être appliqués de haut en bas, comme indiqué sur les schémas. Il est important de masser dans la bonne direction, car cela améliorera le drainage.

Combinez les différentes techniques de massage lors de différentes séances.

Niveau	Mode	LED (YS800)	Intensité	Temps
A	Continu	Non	5	10'
B	Continu	Non	5	10'
C	Pulsé	Oui	4,5	7'
D	Pulsé	Oui	4	7'
E	Pulsé	Oui	4	5'
F	Pulsé	Oui	3,5	5'

HANCHES

Appliquer le gel sur la zone à travailler en utilisant CELL CONTOUR.

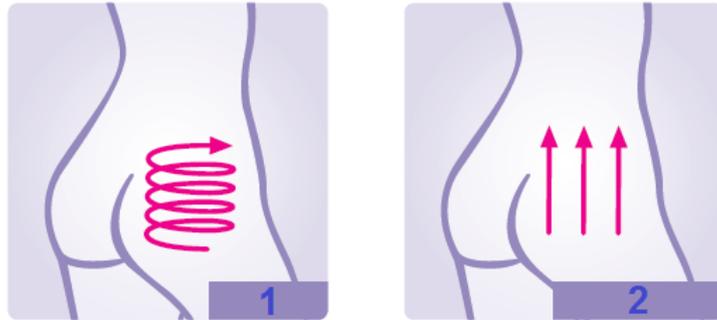


Les mouvements de massage circulaires (1) et longitudinaux (2) doivent être appliqués du bas vers le haut, comme indiqué sur les diagrammes.

Niveau	Mode	LED (YS800)	Intensité	temps
A	Continu	Non	5	12'
B	Continu	Non	4,5	10'
C	Continu	Non	4	7'
D	Pulsé	Oui	3,5	5'
E	Pulsé	Oui	3,5	5'
F	Pulsé	Oui	3	5'

FESSES

Appliquer le gel sur la zone à travailler en utilisant CELL CONTOUR.

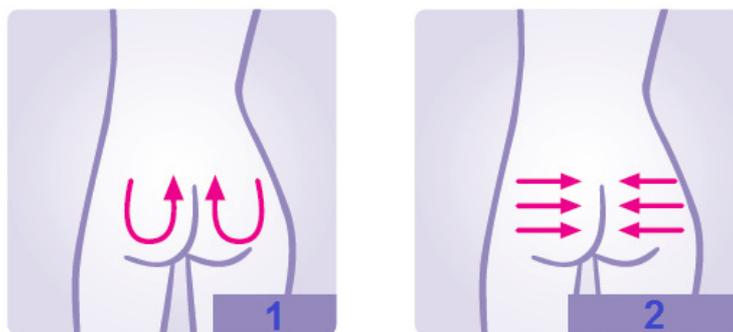


Le massage longitudinal (2) et circulaire (1) doit être effectué dans le sens des flèches indiquées sur les schémas.

Niveau	Mode	LED (YS800)	Intensité	Temps
A	Continu	Non	5,5	12'
B	Continu	Non	5	12'
C	Continu	Oui	4,5	10'
D	Pulsé	Oui	2	10'
E	Pulsé	Oui	2	10'
F	Pulsé	Oui	2	8'

CUISSE INTÉRIEURE

Rappelez-vous de ne jamais appliquer CELL CONTOUR du genou au pied, car il n'y a pas d'accumulation de graisse significative dans cette zone.

Appliquer le gel sur la zone à travailler en utilisant CELL CONTOUR.

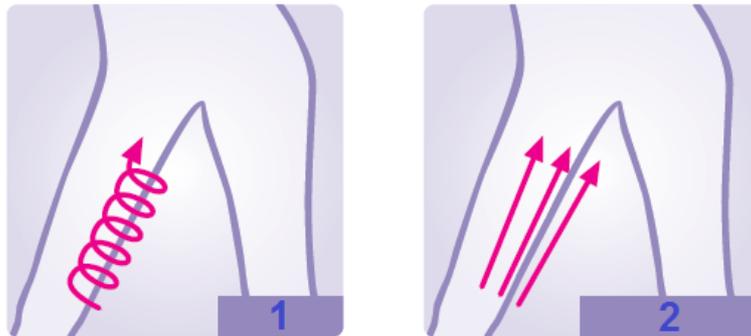


Le massage longitudinal (2) et circulaire (1) doit être effectué du bas vers le haut, comme indiqué sur les schémas. Suivez ces instructions simples pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats.

Niveau	Mode	LED (YS800)	Intensité	Temps
A	Pulsé	Non	4	10'
B	Pulsé	Non	4	10'
C	Pulsé	Oui	3,5	7'
D	Pulsé	Oui	3	7'
E	Pulsé	Oui	3	7'
F	Pulsé	Oui	3	7'

GENOU INTERNE

N'oubliez pas de ne pas appliquer CAVISILIM sur les articulations du genou.

Appliquer le gel sur la zone à travailler en utilisant CELL CONTOUR.

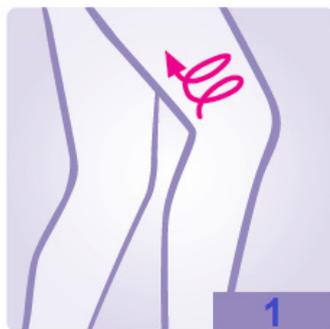


Appliquez un léger massage circulaire (1) sur cette zone, comme indiqué sur le schéma.

Niveau	Mode	LED (YS800)	Intensité	Temps
A	Pulsé	Non	3,5	10'
B	Pulsé	Non	3,5	10'
C	Pulsé	Oui	3	7'
D	Pulsé	Oui	3	7'
E	Pulsé	Oui	3	7'
F	Pulsé	Oui	3	7'

BRAS

Rappelez-vous de ne jamais appliquer CELL CONTOUR sur les mains, les avant-bras ou les articulations.

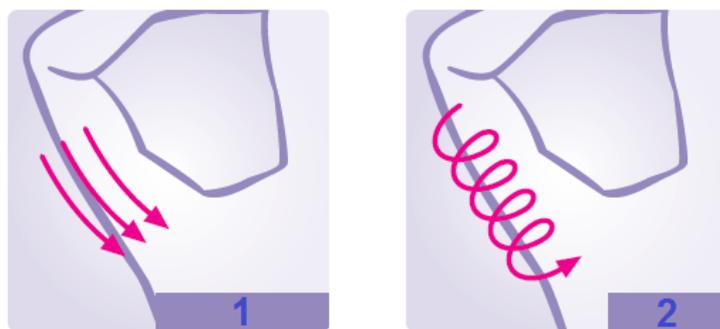

Mettez une quantité généreuse de gel sur la zone à travailler, cela améliorera l'efficacité du traitement et évitera d'endommager la machine.

Effectuez le massage en faisant glisser le combiné lentement et sans appuyer. Masser cette zone doit être appliqué vers le corps, comme indiqué sur le schéma.

Niveau	Mode	LED (YS800)	Intensité	Temps
A	Pulsé	Oui	3,5	7'
B	Pulsé	Oui	3,5	5'
C	Pulsé	Oui	3	5'
D	Pulsé	Oui	3	3'
E	Pulsé	Oui	3	3'
F	Pulsé	Oui	3	5'

Chapitre 4

Utilisation correcte et sûre de CELL CONTOUR.

Pour une utilisation correcte et sûre de CELL CONTOUR, vous devez garder à l'esprit les temps d'application suivants:

- **Par zone de travail : 20 minutes maximum :**
Par «zone de travail», nous entendons chacune des parties du corps où CELL CONTOUR peut être appliqué. Les différentes zones de travail sont: les bras, l'abdomen, la taille, les hanches, les cuisses et les genoux.
- **Par session: 30 minutes maximum:**
Par session, nous entendons utiliser CELL CONTOUR sur deux zones de travail différentes (15 minutes par zone) le même jour.
Par exemple: en une seule séance, vous pouvez appliquer CELL CONTOUR pendant 15 minutes sur vos côtés et 15 minutes sur vos bras. Mais, par exemple, vous ne devez JAMAIS effectuer une session d'application de 30 minutes de votre côté le même jour.
- **Entre les sessions: 72 heures minimum.**
Par «entre les sessions», nous entendons le temps de repos entre chaque session. *Par exemple, l'horaire de la session (maximum) sera: lundi, jeudi et dimanche.*
- **Toutes les 20 séances : vous devez vous reposer pendant 3 semaines.** Après cette période, vous pouvez décider de répéter le premier traitement ou de démarrer le programme de maintenance.
- **Séances de maintenance:** cela dépend de l'individu, mais une session par mois devrait suffire.

TRÈS IMPORTANT

***** Ne jamais dépasser les délais d'application (20 minutes par zone, 30 minutes au total en une journée).** Votre corps ne sait pas "d'où" vous éliminez les graisses, donc une séance ne doit jamais inclure 20 minutes à vos côtés, 20 minutes sur vos jambes, 20 minutes sur vos bras, etc. N'OUBLIEZ PAS: le temps maximum pendant une journée, ajouter toutes les parties du corps à traiter ne doit pas dépasser 30 minutes.

***** Et surtout, respectez la période de repos de 72 heures entre les sessions.** C'est à ce moment que votre corps a besoin d'éliminer toute la graisse dissoute pendant la séance par le système lymphatique.

Chapitre 5

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que la cavitation?

La cavitation est une technique de modelage corporel non invasive (sans chirurgie) qui réduit le volume en éliminant la cellulite et les dépôts graisseux localisés dans l'abdomen, les hanches, les flancs, les bras, les cuisses et les genoux.

Quels sont les avantages par rapport aux autres méthodes?

Le principal avantage est que nous pouvons choisir les zones spécifiques du corps que nous voulons travailler. On pourrait dire que c'est une technologie qui nous permet de nous concentrer sur la cellulite de manière sélective.

La cavitation est-elle douloureuse?

L'utilisation de CELL CONTOUR ne devrait jamais causer de douleur.

Est-il normal d'entendre un léger bourdonnement dans les oreilles lors de l'utilisation de CELL CONTOUR?

Oui, certains utilisateurs peuvent détecter un léger bourdonnement lors de son application.

Peut-il être utilisé sur toutes les parties du corps?

Il ne peut pas être appliqué à toutes les parties du corps. Il ne peut en aucun cas être appliqué sur: la tête ou le visage, le cou, les seins, le thorax, le nombril, l'avant-bras, les articulations, les organes génitaux, le dos, les chevilles ou les ganglions lymphatiques.

CELL CONTOUR réduit-il le poids et le volume?

CELL CONTOUR élimine les grappes de graisse qui ont un poids; par conséquent, votre corps perd du volume.

CELL CONTOUR est-il efficace contre le syndrome de la peau d'orange?

Oui, CELL CONTOUR est efficace contre le syndrome de la peau d'orange, car il détruit les cellules adipeuses à l'origine du stockage des graisses.

Est-ce que CELL CONTOUR peut être utilisé pour éliminer les rides?

Non, CELL CONTOUR n'a pas été conçu pour éliminer les rides.

Peut-on utiliser CELL CONTOUR sur le visage?

CELL CONTOUR ne doit JAMAIS être utilisé sur le visage, les yeux ou le cou.

Après combien de sessions vais-je commencer à voir les résultats?

Vous devriez noter les résultats après les cinq premières sessions, mais les résultats peuvent varier en fonction du sujet.

Combien de temps dois-je attendre entre les sessions ?

Il est conseillé d'attendre 72 heures entre les sessions.

La cellulite réapparaît-elle après avoir utilisé CELL CONTOUR?

Bien que CELL CONTOUR assure des résultats efficaces et durables, nous ne pouvons pas garantir la réapparition de la cellulite. Pour prévenir l'apparition de la nouvelle cellulite, nous recommandons une alimentation équilibrée, des exercices physiques réguliers et des séances d'entretien avec CELL CONTOUR.

Est-ce qu'il y a des effets secondaires?

Si vous êtes en bonne santé, CELL CONTOUR n'a pas d'effets secondaires signalés; Néanmoins, chez certaines personnes, il peut provoquer une rougeur de la peau qui peut durer environ 2 heures.

Est-il nécessaire de combiner CELL CONTOUR avec un régime spécial?

Non, il n'est pas nécessaire de suivre un régime particulier, mais une alimentation équilibrée et une bonne hydratation sont fortement recommandées.

Combien d'eau devrais-je boire?

Il est essentiel de vous hydrater deux heures avant d'appliquer CELL CONTOUR. Il est également conseillé de boire plus d'eau à la fin d'une séance. La quantité recommandée est d'au moins 2 litres pendant ces périodes, car elle aide à éliminer les toxines.

Est-il nécessaire de combiner CELL CONTOUR avec une activité sportive?

Non, ce n'est pas strictement nécessaire, mais au moins 30 minutes d'activité physique amélioreront les résultats car cela aide à drainer les liquides.

Quelles activités sportives peuvent compléter CELL CONTOUR?

La plateforme vibrante est le complément idéal grâce à ses qualités tonifiantes et drainantes. Mais si vous n'avez pas accès à une plate-forme, la marche, le vélo, la natation ou tout autre exercice d'aérobic pendant au moins 30 minutes sont très utiles.

Comment puis-je améliorer les effets de CELL CONTOUR?

En combinant une alimentation équilibrée avec de l'exercice physique régulier et en buvant beaucoup d'eau. Ajouté à cela, le massage de drainage peut aussi être très utile.

A quoi servent les gels anti-cellulite et tonifiants? Quand est-ce que je les utilise?

1. Gel anti-cellulite: Contient des ingrédients actifs qui aident à éliminer la cellulite.
2. Gel tonifiant: contient des ingrédients actifs qui renforcent la zone traitée.

La séquence d'application est la suivante: pendant les premiers jours de traitement, utilisez le gel anti-cellulite et, une fois que vous commencez à remarquer les résultats, utilisez le gel tonifiant qui est appliqué avant le gel Cavitation, comme avec tout autre sérum. La zone doit être massée jusqu'à ce qu'elle soit bien absorbée, puis appliquer une quantité importante de gel de cavitation pour commencer la séance.

Puis-je utiliser CELL CONTOUR sans appliquer de gel?

JAMAIS, c'est parce que le gel agit comme conducteur pour les ondes sonores ultrasoniques avec votre corps. Si vous n'utilisez pas de gel, l'application CELL CONTOUR perd de son efficacité et la machine peut être gravement endommagée.

Puis-je utiliser n'importe quel type de gel?

Nous vous recommandons d'utiliser uniquement le gel TECNOVITA by BH, car l'utilisation de tout autre type pourrait endommager la machine.

Quand est-il déconseillé d'utiliser CELL CONTOUR?

- Si vous êtes enceinte ou pensez l'être.
- si vous allaitez.
- Traitements de fertilité en cours.
- Si vous avez une maladie cardiaque quelconque.
- Si vous souffrez de problèmes de peau.
- Ostéoporose.
- La fibromyalgie.
- Tumeurs malignes.
- Hypertension.
- Taux de cholestérol élevé.
- Problèmes rénaux
- lacunes physiques
- Implants métalliques ou prothèses.
- Malformations physiques.
- Épilepsie.
- Traitement à long terme avec des médicaments: anti-inflammatoires, anticoagulants, antibiotiques ou antihistaminiques.
- Dépression.
- Traitement psychiatrique ou psychologique.
- Problèmes de foie (foie gras)
- Syndrome de l'intestin irritable.
- Diabète

Puis-je utiliser CELL CONTOUR si je suis enceinte?

Vous ne devez jamais utiliser CELL CONTOUR si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être.

Peut-on utiliser CELL CONTOUR pendant l'allaitement?

Ne l'utilisez pas pendant l'allaitement.

Peut-on utiliser CELL CONTOUR sur les seins?

NE JAMAIS l'appliquer sur les seins.

Puis-je utiliser CELL CONTOUR pendant la menstruation?

L'utilisation sur la zone abdominale est déconseillée pendant les menstruations car elle peut provoquer une augmentation des saignements. Cependant, il peut être appliqué dans d'autres domaines.

Puis-je utiliser CELL CONTOUR si j'ai un DIU?

Oui.

CELL CONTOUR peut-il affecter mon taux de cholestérol?

L'utilisation de CELL CONTOUR peut augmenter votre taux de cholestérol.

CELL CONTOUR peut-il être utilisé avec des problèmes de peau?

Il ne doit pas être utilisé si vous avez des problèmes de peau. Consultez votre médecin.

Puis-je utiliser CELL CONTOUR si j'ai des implants auriculaires?

Ne l'utilisez pas si vous avez des implants ajustés.

Puis-je utiliser CELL CONTOUR lorsque je me baigne ou que je me douche?

Le combiné ou la machine ne doivent en aucun cas entrer en contact avec de l'eau en raison du risque d'électrocution.

Comment puis-je nettoyer CELL CONTOUR et le combiné?

Ne plongez jamais CELL CONTOUR ou le combiné dans l'eau. Utilisez un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau.

Chapitre 6

CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Ce produit est fourni avec un câble secteur avec un fil de terre et une fiche avec une broche de terre.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, la mise à la terre redirige le courant électrique hors de la machine et réduit le risque de choc électrique.

AVERTISSEMENT! Si l'équipement n'est pas correctement mis à la terre, il existe un risque de choc électrique.

Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'équipement, si elle ne correspond pas à la prise murale, demandez à un électricien d'installer une prise de courant.

Ce produit doit être utilisé sur un circuit de 220 volts.

Suivez ces recommandations:

1. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
2. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon de branchement est endommagé ou usé.
3. Tenir le cordon de branchement à l'écart des surfaces chaudes.
4. Ne pas utiliser l'appareil en plein air.
5. Pour débrancher l'appareil, placez l'interrupteur sur la position «0» et retirer la fiche de la prise de courant.

Garantie

Nous vous invitons à lire attentivement ce chapitre pour connaître exactement la garantie qu'offre le fabricant ainsi que vos responsabilités en qualité de propriétaire de l'appareil.

Garantie

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EXERCYCLE, S.L., vous remercie d'avoir acheté ce produit et de la confiance que vous nous témoignez. Tous nos produits font l'objet de rigoureux contrôles de qualité, cependant, si un problème quelconque se présente au cours de la période de garantie, nous vous prions de lire attentivement les conditions de la garantie et de vous adresser au distributeur officiel de votre région.

Ce certificat de garantie a été rédigé conformément aux dispositions de la Directive 1999/44/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 mai 1999 relative à des aspects concrets de la vente et de la garantie des biens de consommation, incluse dans le droit espagnol en vertu de la Loi 23/2003 du 10 juillet sur les garanties dans la vente des biens de consommation.

En ce sens, EXERCYCLE, S.L., titulaire du NIF B-01029032 dont le siège social est à Vitoria, calle Zurrupitieta, 22, garantit ce produit conformément aux termes et conditions ci-après :

1. PÉRIODE DE GARANTIE

Le produit faisant l'objet de ce certificat est garanti DEUX (2) ANS à compter de la livraison du produit, c'est à dire à compter de la date indiquée sur le ticket de caisse, sur la facture d'achat ou sur le bordereau de livraison correspondant, si cette livraison est ultérieure. Toute réclamation doit être obligatoirement accompagnée du justificatif d'achat. Les conditions de la garantie peuvent changer d'un pays à l'autre. La période de garantie indiquée n'est applicable que dans les pays d'Europe.

2. DROITS COUVERTS PAR LA GARANTIE :

Réparation ou remplacement de l'appareil qui, le cas échéant, est à réaliser dans un délai raisonnable et sans que cela provoque des inconvénients chez le consommateur étant donné la nature de l'appareil et l'utilisation réservée par le consommateur.

Il est fait exception des cas où la réparation ou le remplacement entraîneront pour le vendeur des frais non raisonnables par rapport à d'autres façons de résoudre les problèmes et à condition que celles-ci ne portent pas préjudice au consommateur.

La main-d'œuvre, le déplacement et les pièces concernant les réparations seront gratuits.

En cas de réparation ou de remplacement d'un appareil par un appareil neuf, le délai de garantie sera suspendu temporairement jusqu'à la livraison de l'appareil neuf qui bénéficiera d'une garantie d'au moins 6 mois, cependant cela ne donnera lieu en aucun cas au démarrage d'une nouvelle période de 2 ans de garantie.

- En outre, une (i) réduction du prix sera accordée ou la (ii) commande sera annulée, selon décision du client, si la réparation ou le remplacement n'a pas été réalisé dans le délai raisonnable requis et sans présenter d'inconvénients pour le client. La (i) réduction du prix sera proportionnelle à la différence existant entre le prix que le bien aurait eu à la date de livraison si l'appareil avait été en conformité avec la commande et le prix que le bien effectivement servi avait à la date de ladite livraison. La (ii) commande ne sera pas annulée si le motif de non-conformité est d'une importance insignifiante.

3. LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Les défauts découlant d'une utilisation autre que celle indiquée dans le Manuel de l'utilisateur.
- L'utilisation à titre professionnel ou la location à titre commercial du produit.
- Une installation défectueuse, un mauvais montage ou la cassure de pièces due à un mauvais montage (voir le Manuel de l'utilisateur où sont indiqués les conseils d'installation et d'utilisation de l'appareil).

- L'utilisation inadéquate de l'appareil (utilisation sans appliquer le gel, dépassement des temps d'utilisation, exposer trop longtemps l'appareil à l'humidité, etc) ou problèmes dus au manque d'entretien (encrassement sur une partie de l'appareil ou de ses accessoires, etc). (Voir le Manuel de l'Utilisateur dans lequel figurent les conseils d'installation et d'utilisation du produit).
- Réparations réalisées par un personnel non autorisé pour ce faire par EXERCYCLE, S.L. ou appareils ouverts ou manipulés par des personnes non autorisées pour ce faire par le fabricant.
- Différences par rapport au produit standard comme de légères vibrations ou cassures de pièces ne répercutant pas dans le fonctionnement de l'appareil ou non provoquées par un défaut de fabrication.
- Rayures, éraflures, abrasions, coups, chutes, etc, dus à un soin défectueux de l'appareil.
- Défauts sur l'appareil dus à des dommages au cours du transport.

4. VOIES DE RÉCLAMATION

- Toute réclamation pour non-conformité prescrit dans les trois ans à compter de la date de livraison du bien.
- Le client est tenu de signaler le défaut dans les 2 mois qui suivent la détection dudit défaut.
- Cette garantie ne concerne pas les autres droits légaux du consommateur accordés par la loi en vigueur et elle est incompatible avec l'exercice d'autres actions prises pour résoudre les cas de vices cachés à l'achat.
- Toutes les éventuelles questions au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la présente garantie seront traitées selon la loi nationale applicable.

Tout différend quant à l'interprétation, la validité et l'exécution de cette commande, sera tranché par les tribunaux de la ville de Vitoria.

Certificats

Par l'intermédiaire du présent document, Exercycle S.L. déclare que ce produit répond aux conditions essentielles et à toutes les dispositions applicables ou exigibles des Directives 2004/108/CE et 2006/95/CE.

Liste des pieces

Pour commander des pièces de rechange, veuillez indiquer:

Modèle de l'appareil | N° de la pièce | Quantité

Exemple:

YS600	4	1
-------	---	---

YS600

1. Unité principal
2. Support du combiné avec des vis
3. Combiné 1
4. Câble d'alimentation

Fig.1



YS800

1. Unité principal
2. Support du combiné avec des vis
3. Combiné 1
4. Combiné 2
5. Câble d'alimentation

Fig.2



Spécifications techniques

Poids net: 7,5 kg

Dimensions: 42 cm x 35 cm x 22 cm.

Ultrasons: 40 Khz

Puissance: 60W

Source d'alimentation: Tension: AC 220V

Date d'achat.

Acheté à

Renseignements de l'acheteur.

Cachet commercial du distributeur.

Veillez conserver cette facture comme justificatif de l'achat.

EXERCYCLE,S.L.

c/ Zurrupitieta, 22 • 01015 VITORIA (Spain) • Tel. +34 945 29 02 58

Fax: +34 945 29 00 49 • e-mail: sat@bhfitness.com

www.bhfitness.com