

cosmobelle

cavitation

your silhouette is up to you

Español

Português



Manual de usuario
Manual do utilizador
CB1100

cosmobelle



cavitation

your silhouette is up to you

MANUAL DE USUARIO

Enhorabuena, primeramente nos gustaría agradecerle la compra de SILUET SPHERA y la confianza depositada en nosotros. A través de este práctico Manual de Usuario y siguiendo sus sencillas instrucciones usted conseguirá unos resultados comparables a los que obtendría de la mano de un profesional de la belleza.

Le recomendamos encarecidamente leer este Manual de Usuario de forma detenida, su lectura y comprensión le ayudará a utilizar SILUET SPHERA de una forma eficaz y segura.

CONTENIDOS

CAPÍTULO 1

- contenido de la caja

CAPÍTULO 2

- características básicas de SILUET SPHERA
- instrucciones de uso

CAPÍTULO 3

- modos de aplicación

CAPÍTULO 4

- para una correcta y segura aplicación de SILUET SPHERA

CAPÍTULO 5

- preguntas frecuentes sobre SILUET SPHERA

CAPÍTULO 6

- información importante de seguridad
- despiece
- certificados
- garantía
- especificaciones técnicas


CAPÍTULO 1

Contenido de la caja


En esta caja encontrará todo lo necesario para poder disfrutar de SILUET SPHERA desde este momento. Compruebe minuciosamente en la siguiente lista todos los elementos que debe contener su embalaje.

- Manual del usuario
- DVD
- Cuerpo central
- Manípulo
- Cable de conexión a la red
- Gel de Cavitación
- Loción post cavitación


Cuerpo central

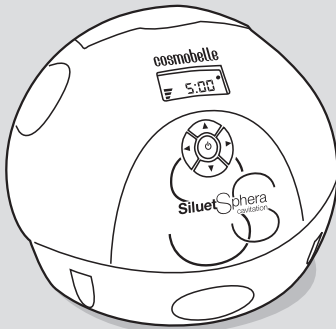

Manípulo

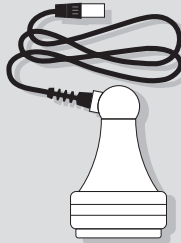


Manual de usuario

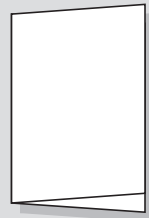

DVD



Cable de conexión a la red

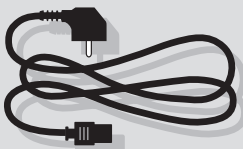

Gel de Cavitación



Loción post cavitación



CAPÍTULO 2

Características básicas de Siluet Sphera

Es

SILUET SPHERA es un dispositivo de alta tecnología que nos permite eliminar de una forma selectiva y eficiente las acumulaciones de grasa localizada (celulitis, piel de naranja) de nuestro cuerpo.

La tecnología empleada es la de emisión de ultrasonidos, fenómeno físico conocido como cavitación, que provoca la eliminación de las células de grasa.

Esta tecnología de contrastados resultados, es ampliamente utilizada en centros de estética en todo el mundo para combatir de una forma indolora y no invasiva la celulitis.

Características del modelo SILUET SPHERA

- Tiempo: Programable de 1 a 15 minutos.
- Intensidad: Programable en 6 niveles de intensidad.

En esta unidad únicamente deberá preocuparse de programar de forma sencilla dos funciones: intensidad y tiempo.

Con la intensidad controlamos el nivel de penetración de las ondas sonoras en su piel. A más intensidad, mayor será la profundidad que alcancen las ondas.




La función tiempo le ayudará a elegir los minutos que usted quiere trabajar con SILUET SPHERA. Por razones de seguridad el tiempo que usted puede programar será de hasta 15 minutos que corresponde al tiempo máximo recomendado para trabajar una zona. Sin embargo usted puede reducir ese tiempo máximo en intervalos de 1 minuto. Una vez finalizado el tiempo seleccionado SILUET SPHERA le avisará con un pitido.

Instrucciones de uso de Siluet Sphera

Precauciones: Antes de comenzar a utilizar este aparato consulte a su médico. Esta advertencia es especialmente importante para personas con problemas de salud. No es recomendable su uso en menores de 18 años. Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños.

Puesta en marcha

- Procederemos a conectar el manípulo al cuerpo central. Para ello tomaremos la clavija del manípulo y la insertaremos en la conexión situada en el cuerpo central indicada con la fig. 2.1
- Conecte el terminal del cable de conexión eléctrica al conector de la máquina y el otro enchúfelo a la red eléctrica (220V.) fig. 2.2
- Ponga el interruptor de la máquina en posición (I) para poner la máquina en marcha. fig. 2.3

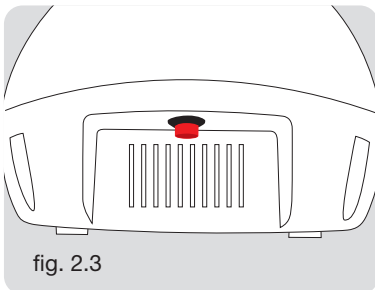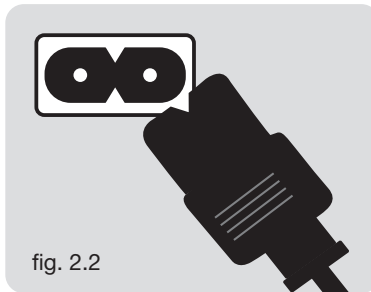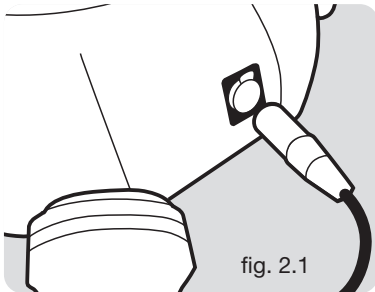

Elementos del monitor

El monitor de SILUET SPHERA está compuesto por una pantalla o display y cinco pulsadores o teclas.

- En el display se muestra información sobre la sesión de cavitación.
- Las teclas tienen las siguientes funciones:
 - ▲ y ▼ cambio de intensidad.
 - ◀ y ▶ ajuste de tiempo.
 - ⏻ inicio y fin de sesión.

Sesión de cavitación

Las variables que intervienen en el masaje son 2:

- **Tiempo:** mide en minutos y segundos la duración de la sesión. Tiene la posibilidad de elegir de 1 a 15 minutos (intervalos de 1 minuto).
- **Intensidad:** representa el nivel de intensidad de la sesión. SILUET SPHERA permite seleccionar entre 6 niveles.

Comienzo de la sesión

Una vez conectada la máquina a la corriente eléctrica y puesto el interruptor en marcha, verá que al cabo de unos segundos, aparecen en el monitor por defecto, los siguientes parámetros de trabajo:

- Tiempo: 5 minutos (5:00)
- Intensidad: nivel 3 (3 rayas)

A partir de aquí podrá modificar los parámetros tiempo e intensidad en busca de la sesión deseada de la siguiente forma:

Variación de tiempo de la sesión

Una vez se encuentra en la pantalla con los parámetros seleccionados por defecto puede modificar la duración de la sesión con las teclas ◀ y ▶.

El valor que aparece por defecto es 5:00 (5 minutos) pero se puede modificar en intervalos de 1 minuto entre los valores 1:00 y 15:00.

Variación de la intensidad de masaje

Una vez seleccionado el tiempo deseado se podrá configurar la intensidad. Para ello debe pulsar las teclas ▲ y ▼.

El nivel de intensidad que aparece por defecto o el de la última sesión, se pueden modificar seleccionando entre los niveles 1 y 6 (1 a 6 rayas). Se puede cambiar la intensidad durante el funcionamiento presionando las teclas ▲ y ▼.

Finalmente, agarre firmemente el manipulador y colóquelo en la zona que desea trabajar y presione la tecla central ⏻ para dar inicio a la sesión. La tecla cambiará de color (de azul a rosa) y sonará un pitido. Masajee como se indica en el DVD o en “modos de aplicación”.

Si desea parar la sesión, basta con presionar nuevamente la tecla central ⏻ y ésta detendrá la sesión, volviendo el contador al tiempo seleccionado previamente.

Cuando el contador del tiempo llegue a **0:00**, la unidad parará y emitirá un pitido para avisarle de que ha terminado la sesión seleccionada. El contador volverá al tiempo seleccionado previamente.

CAPÍTULO 3

Modos de aplicación de Siluet Sphera

Aplicáse siempre gel de forma abundante en la zona que desee trabajar y comience a tratarla deslizando el manipulador lentamente y sin apretar, tal como muestran los dibujos.

Si necesita adquirir gel o alguna de nuestras cremas de precavitación lo podrá hacer en el establecimiento donde compró SILUET SPHERA o consultar otros puntos de venta en la página web: www.cosmobelle.com

En cada uno de los apartados siguientes encontrará un cuadro con los protocolos de uso. Antes de empezar a usar el aparato, ud. deberá determinar en qué nivel de grasa se encuentra en cada zona donde se va a tratar.


- A** Gran acumulación de grasa de densidad alta
- B** Gran acumulación de grasa de densidad media
- C** Acumulación media de grasa de densidad media
- D** Acumulación pequeña de grasa
- E** Piel de naranja
- F** Sesión de mantenimiento

Es

Abdomen central

Recuerde que nunca debe aplicar SILUET SPHERA sobre el ombligo, pechos, zona torácica y zona genital.

Ponga gel de forma abundante sobre su abdomen y comience a trabajar la zona deslizando el manipulador lentamente y sin apretar, tal como muestra los dibujos.

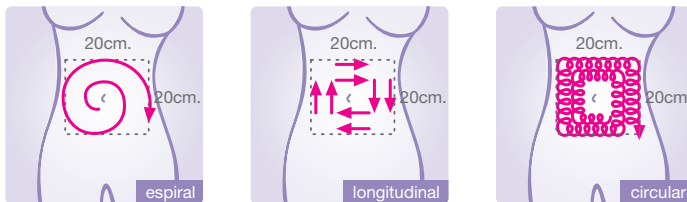

Para conseguir un mejor resultado, le recomendamos aplique SILUET SPHERA combinando las distintas técnicas de masaje (espiral, longitudinal, circular) en diferentes sesiones.

Le recomendamos recostarse para una más confortable aplicación de SILUET SPHERA.

Nivel	Intensidad	Tiempo
A	6	10'
B	5	10'
C	4	10'
D	3	8'
E	3	8'
F	2	8'

Flancos

Aplique gel sobre la piel de la zona a trabajar con SILUET SPHERA.




Tanto el masaje circular como el masaje longitudinal deberá aplicarse de arriba hacia abajo tal como muestran los dibujos. Es importante respetar las direcciones del masaje ya que con ello favorecemos el drenaje. Combine las distintas técnicas de masaje en diferentes sesiones.

Nivel	Intensidad	Tiempo
A	5	10'
B	5	10'
C	4	10'
D	3	8'
E	3	5'
F	3	5'

Caderas

Aplique gel sobre la zona a trabajar con SILUET SPHERA.

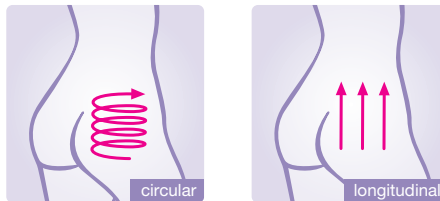


Tanto el masaje circular como el masaje longitudinal deberá aplicarse de abajo hacia arriba tal como muestran los dibujos. Durante el tratamiento incida sobre la zona de mayor acumulación de grasa.

Nivel	Intensidad	Tiempo
A	5	8'
B	5	8'
C	5	8'
D	4	8'
E	3	5'
F	3	5'

Glúteos

Aplique gel sobre la zona a trabajar con SILUET SPHERA.

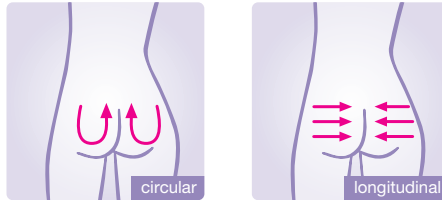

Es


Tanto el masaje longitudinal como circular deberá realizarse siguiendo el sentido de las flechas tal como se muestra en los dibujos.

Nivel	Intensidad	Tiempo
A	6	10'
B	6	10'
C	6	8'
D	5	8'
E	4	10'
F	4	10'

Interior del muslo

Recuerde no aplicar nunca SILUET SPHERA de la rodilla hacia el pie ya que en esa zona no se producen acumulaciones significativas de grasa.

Aplique gel sobre la zona a trabajar con SILUET SPHERA.

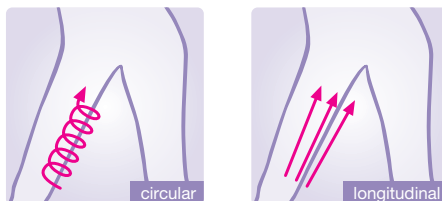


Tanto el masaje longitudinal como circular deberá realizarse de abajo hacia arriba, tal como muestran los dibujos. Seguir estas sencillas instrucciones le ayudara a una mejora en los resultados.

Nivel	Intensidad	Tiempo
A	5	10'
B	4	10'
C	3	10'
D	3	8'
E	2	8'
F	2	8'

Interior rodilla

Recuerde no aplicar SILUET SPHERA sobre las articulaciones de las rodillas.

Aplique gel sobre la zona a trabajar con SILUET SPHERA.


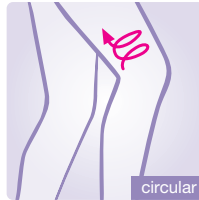


En esta zona aplicaremos un ligero masaje circular tal como se muestra en el dibujo.

Nivel	Intensidad	Tiempo
A	2	10'
B	2	10'
C	2	8'
D	2	8'
E	2	8'
F	2	8'

Brazos

Recuerde nunca aplicar SILUET SPHERA en la zona de manos, antebrazo o articulaciones.

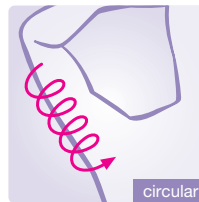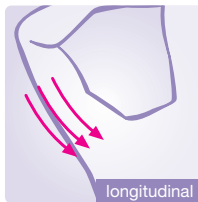

Asegúrese de poner gel de forma generosa en la zona que vaya a trabajar ya que mejorará la efectividad del tratamiento y evitara dañar la maquina.

Realice el masaje, deslizando el manipulador lentamente y sin apretar. El masaje de esta zona siempre se deberá aplicar en dirección hacia el cuerpo, tal como muestra el dibujo.

Nivel	Intensidad	Tiempo
A	2	8'
B	2	8'
C	2	5'
D	2	3'
E	2	3'
F	2	5'

CAPÍTULO 4

Para una correcta y segura aplicación de Siluet Sphera

Es

Para una correcta y segura aplicación de SILUET SPHERA, debe tener en cuenta los siguientes tiempos de aplicación:

- **POR ZONA DE TRABAJO: máximo 15 minutos.**

Entendemos por “zona de trabajo” cada una de las partes de nuestro cuerpo donde podemos aplicarnos SILUET SPHERA. Las distintas zonas de trabajo son: brazos, abdomen, flancos, caderas, interior de muslos e interior de rodilla.

Ej: en una misma sesión se podrá realizar la aplicación de SILUET SPHERA durante 15 minutos en flancos y 15 minutos en brazos. Pero, por ejemplo, NUNCA debería realizarse en un mismo día una sesión de 30 minutos de aplicación sólo en flancos.

- **POR SESIÓN: máximo 30 minutos.**

Entendemos por sesión la aplicación de SILUET SPHERA en un mismo día en 2 zonas de trabajo diferentes (máximo de 15 minutos por zona).

- **ENTRE SESIONES: mínimo de 72 horas.**

Entendemos por “entre sesiones” el tiempo que debe transcurrir entre sesión y sesión. *Ej: en una semana, una planificación de sesiones (la máxima) sería: lunes, jueves y domingo.*

- **CADA 20 SESIONES: se deberá descansar durante 3 semanas.** Tras ese periodo se podrá repetir completamente el primer tratamiento, o bien comenzar el programa de mantenimiento.
- **SESIONES DE MANTENIMIENTO:** depende de cada individuo, pero una sesión al mes sería suficiente.

MUY IMPORTANTE

***** Nunca sobrepase los tiempos de aplicación (15 minutos por zona, 30 minutos en total al finalizar el día).** Su cuerpo no sabe “de dónde” está usted eliminando la grasa, por lo que no puede realizar en una sesión aplicaciones de 15 minutos en flancos y 15 minutos en piernas y 15 minutos en brazos, etc. **RECUERDE:** en total, el tiempo máximo en un día, sumando todas las partes del cuerpo a tratar, debe ser de 30 minutos.

***** Y, sobre todo, respete el tiempo de descanso de 72 horas entre sesiones.** Es el tiempo que su cuerpo necesita para eliminar a través del sistema linfático toda la grasa que ha sido disuelta durante la sesión.

CAPÍTULO 5

Preguntas frecuentes

¿Qué es la cavitación?

La cavitación es una técnica no invasiva (sin cirugía) para moldear el cuerpo, que reduce volumen eliminando la celulitis y los depósitos de grasa localizada en abdomen, caderas, flancos, brazos, cara interna de muslos y rodillas.

¿Qué ventajas tiene sobre otros métodos?

La ventaja fundamental es que podemos elegir las zonas determinadas del cuerpo que queremos trabajar. Se puede decir que es una tecnología que nos permite trabajar la celulitis de forma selectiva.

¿Es la cavitación dolorosa?

El uso de SILUET SPHERA nunca debe provocar dolor.

¿Es normal escuchar un pequeño zumbido en los oídos durante el uso de SILUET SPHERA?

Sí, en algunos usuarios es posible que perciban un pequeño zumbido durante su aplicación.

¿Se puede utilizar en todas las partes del cuerpo?

No se puede aplicar en todas las partes del cuerpo. En ningún caso se debe aplicar: sobre cabeza o cara, cuello, senos, zona torácica, ombligo, antebrazo, articulaciones, genitales, espalda, tobillos ni ganglios.

¿Con SILUET SPHERA se pierde peso o volumen?

SILUET SPHERA elimina los cúmulos de materia grasa los cuales tienen peso y al mismo tiempo fruto de su desaparición nuestro cuerpo pierde volumen.

¿Es SILUET SPHERA efectivo con la piel de naranja?

Sí, SILUET SPHERA es eficaz con la piel de naranja al destruirse las células adiposas causantes del almacenamiento de grasa.

¿SILUET SPHERA sirve para quitar las arrugas?

SILUET SPHERA no es un sistema creado para la eliminación de arrugas.

¿Se puede usar SILUET SPHERA en la cara?

No se debe utilizar NUNCA SILUET SPHERA en la cara, ojos ni cuello.

¿Con cuántas sesiones se empiezan a ver los resultados?

Se deberían observar resultados a partir de las primeras cinco sesiones, sin embargo los resultados pueden variar dependiendo del sujeto.

¿Cuántos días debe esperarse entre sesión y sesión?

Se recomienda dejar 72 horas entre sesión y sesión.

¿Vuelve a aparecer la celulitis tras utilizar SILUET SPHERA?

Aunque SILUET SPHERA asegura eficacia y durabilidad a lo largo del tiempo no podemos garantizar que no vuelva a aparecer. Para evitar la nueva aparición de celulitis se recomienda una dieta equilibrada, beber mucho agua, la práctica regular de ejercicio físico y sesiones de mantenimiento con SILUET SPHERA.

¿Tiene efectos secundarios?

Si usted está sano, SILUET SPHERA no tiene ningún efecto secundario descrito, sin embargo en algunas personas puede producir un enrojecimiento en la piel que puede durar unas 2 horas.

¿Es necesario combinar SILUET SPHERA con alguna dieta?

No es necesario seguir ninguna dieta especial, sin embargo es altamente recomendable llevar una alimentación equilibrada e hidratarse convenientemente.

¿Cuánto agua debo beber?

Es imprescindible comenzar a hidratarse dos horas antes de aplicar SILUET SPHERA. También después de la finalizar es aconsejable seguir hidratándose. Se recomienda ingerir un mínimo de 2 litros durante estos periodos ya que ayuda a la eliminación de toxinas.

¿Es necesario combinar SILUET SPHERA con la práctica deportiva?

No es estrictamente necesario, pero la práctica de al menos 30 minutos de alguna actividad física potencia los resultados al ayudar al drenaje de líquidos.

¿Qué prácticas deportivas se complementan con SILUET SPHERA?

La plataforma vibratoria es el complemento ideal por sus cualidades tonificantes y drenantes. Pero si no tiene acceso a la plataforma, un paseo, bicicleta estática, natación u otro ejercicio aeróbico realizado durante un mínimo de 30 minutos son de gran ayuda.

¿Cómo puedo potenciar los efectos de SILUET SPHERA?

Conjugando una dieta equilibrada con la práctica habitual de deporte y la ingesta abundante de agua. Además los masajes de drenaje son de gran ayuda.

¿Puedo utilizar SILUET SPHERA sin aplicar gel?

NUNCA, ya que el gel actúa como agente conductor de los ultrasonidos con su cuerpo. Si no utilizamos gel la aplicación de SILUET SPHERA pierde su efectividad y la máquina puede resultar seriamente dañada.

¿Puedo utilizar cualquier tipo gel?

Recomendamos utilizar únicamente gel COSMOBELLE ya que el uso de cualquier otro podría dañar la máquina.

¿Cuándo esta contraindicado el uso de SILUET SPHERA?

- Si se encuentra embarazada o cree estarlo.
- Si se encuentra en período de lactancia.
- Tratamientos de fertilidad.
- Si presenta cardiopatía de cualquier tipo.
- Si tiene problemas dermatológicos.
- Osteoporosis.
- Fibromialgia.
- Tumores malignos.
- Hipertensión.
- Niveles de colesterol altos.
- Insuficiencias renales.
- Insuficiencias físicas.
- Implantes metálicos o prótesis.
- Implantes auditivos.
- Malformaciones físicas.
- Epilepsia.
- Tratamiento prolongado con medicamentos: anti-inflamatorios, anticoagulantes, antibióticos o antihistamínicos.
- Depresión.
- Tratamiento psiquiátrico o psicológico.
- Problemas hepáticos (hígado graso)....
- Colon irritable.
- Diabetes.

¿Puedo utilizar SILUET SPHERA si estoy embarazada?

No debe NUNCA usar SILUET SPHERA si está embarazada o cree estarlo.

¿Puedo usar SILUET SPHERA durante la lactancia?

No utilizar durante el periodo de lactancia.

¿Puedo aplicar SILUET SPHERA en los senos?

NUNCA se debe aplicar sobre los senos.

¿Puedo utilizar SILUET SPHERA durante la menstruación?

No es recomendable su aplicación durante ese período sobre la zona abdominal ya que puede producir un aumento del sangrado. Sin embargo puede aplicarse en otras zonas.

¿Puedo usar SILUET SPHERA llevando DIU?

Sí.

¿Puedo usar SILUET SPHERA sobre la piel tatuada?

No. Debe evitar pasar el manípulo sobre zonas tatuadas.

¿Puedo usar SILUET SPHERA si tengo implantes (clavos, etc)?

Puede usar SILUET SPHERA si tiene implantes siempre y cuando NO masajee nunca sobre estas zonas: por ejemplo, si el implante está en la rodilla, no habría problema en masajear el abdomen. Tampoco habrá problema si el implante está en la espalda, ya que nunca debe usar SILUET SPHERA en esta parte del cuerpo.

¿Puede afectar SILUET SPHERA a mis niveles colesterol?

El uso de SILUET SPHERA puede aumentar sus índices de colesterol.

¿Se puede usar SILUET SPHERA con afecciones de piel?

No se debe utilizar si tiene alguna afección en la piel. Consulte a su médico.

¿Puedo usar SILUET SPHERA si tengo implantes de oído?

No se debe utilizar en caso de tener implantes de oído.

¿Puedo usar SILUET SPHERA cuando me estoy bañando o duchando?

Bajo ningún concepto el manípulo ni la máquina deben entrar en contacto con el agua ya que existe el riesgo shock eléctrico.

¿Cómo debo limpiar SILUET SPHERA y el manípulo?

Para limpiar SILUET SPHERA o el manípulo, nunca los sumerja en agua. Utilice un paño ligeramente humedecido con agua.

CAPÍTULO 6

Información importante de seguridad

No modifique el enchufe que incluye el aparato. Si no encaja en la toma eléctrica, solicite a un electricista la instalación de una toma adecuada.

Este producto debe utilizarse en un circuito de 220-240 voltios y tiene una clavija similar a la que se muestra en la **Fig. 5.1**

Siga estas recomendaciones:

1. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
2. No utilice la máquina con el cable eléctrico dañado o desgastado.
3. Mantenga el cable eléctrico lejos de superficies calientes.
4. Nunca utilice la máquina al aire libre.
5. Para desenchufar, ponga el interruptor en la posición «0» y entonces desenchufe de la red.




Protección

Este modelo está dotado de una protección electrónica de parada automática para una óptima conservación de los circuitos tanto electrónicos como eléctricos.

Esta protección se activará (fusible) si la unidad es sometida a un esfuerzo o calentamiento anormal.

Si esto ocurriese:

1. Desconecte la unidad de la red eléctrica
2. Ponga el interruptor (L), situado en el lateral de la máquina, en la posición «0» (OFF) **fig. 5.2**
3. Desatornille la carcasa exterior de la máquina
4. Cambie el fusible (1 Amp) que se encuentra dentro del portafusibles, ubicado al lado del conector de cable de red **fig. 5.3**
5. Conecte la unidad a un enchufe. Ponga el interruptor (L) en posición «I» (ON) **fig. 5.2**

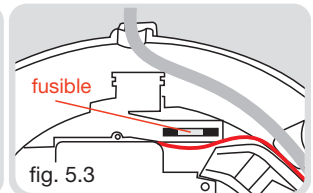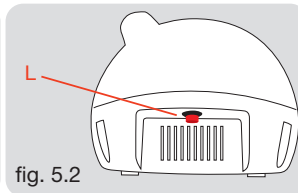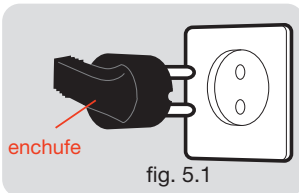

Garantía

Sugerimos que lea atentamente este ejemplar para conocer con exactitud la cobertura de la garantía otorgada por el fabricante y sus responsabilidades como propietario.

Garantías

INFORMACIÓN GENERAL

EXERCYCLE, S.L., como distribuidor de Cosmobelle, desea agradecerle la compra de este producto y la confianza que ha depositado en nosotros. Nuestros productos han sido sometidos a un riguroso control de calidad. No obstante, si tuviera algún problema con este aparato durante el periodo de garantía, le rogamos leer atentamente las condiciones de garantía y se ponga en contacto con el distribuidor autorizado de su zona.

El presente certificado de garantías ha sido redactado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y garantía de los bienes de consumo, incorporada al derecho español en virtud de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo.

En este sentido, EXERCYCLE, S.L., provista de NIF B-01029032 y con domicilio en Vitoria, calle Zurrupitieta, 22, garantiza este producto en los siguientes términos y condiciones:

1. PERIODO DE GARANTÍA

El producto amparado por este certificado está protegido durante un período de DOS (2) AÑOS contados desde la entrega del producto, entendiéndose por tal la fecha que figura en el ticket o factura justificada de la compra del producto, o en el albarán de entrega correspondiente si éste fuese posterior. Es imprescindible, para posibles reparaciones la presentación de la misma. La política respecto al período de garantía puede variar entre países diferentes. El período de garantía indicado es solamente aplicable para Europa.

2. DERECHOS QUE CUBRE LA GARANTÍA

- Reparación o sustitución del producto que, en su caso, se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor, habida cuenta de la naturaleza del producto y de la finalidad que tuviera para el consumidor.
- Se exceptúan aquellos supuestos en los que la reparación o sustitución imponga al vendedor costes que no sean razonables en comparación con otras formas de saneamiento, cuando las mismas no perjudiquen al consumidor.
- Las reparaciones serán gratuitas para el consumidor en los conceptos de mano de obra, desplazamiento y materiales.
- En el caso de reparación o sustitución de una máquina por otra nueva, el plazo de garantía se suspende temporalmente hasta la entrega de ese nuevo aparato y se dispondrá siempre como mínimo de 6 meses de garantía, pero en ningún caso empieza un periodo nuevo de 2 años.

- Así mismo, se producirá una (i) rebaja del precio o se procederá a la (ii) resolución del contrato, a elección del consumidor, cuando la reparación o sustitución no se hayan llevado a cabo en plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La (i) rebaja del precio, será proporcional a la diferencia existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega de haber sido conforme con el contrato y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de dicha entrega. La (ii) resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

3. LA GARANTÍA NO CUBRE

- Defectos atribuibles al empleo diferente al establecido en el Manual de Usuario.
- El uso a título profesional o el arrendamiento a título comercial del producto.
- Mala instalación, mal montaje o rotura de piezas por montaje inadecuado, (revise el Manual de Usuario donde se detallan las recomendaciones para la instalación y uso de la máquina).
- Uso indebido del producto (utilización sin aplicación de gel, exceder tiempos de utilización, exposición a humedad demasiado elevada, etc) o problemas derivados de una falta de mantenimiento (acumulación de suciedad en cualquier parte del producto o sus accesorios, etc) (revise el Manual de Usuario donde se detallan las recomendaciones para la instalación y uso del producto).
- Reparaciones realizadas por personal no autorizado por EXERCYCLE, S.L. o aparatos abiertos o manipulados por personas no autorizadas por el fabricante.
- Desviaciones del producto estándar, como ligeras vibraciones, ruidos o roturas de piezas que no afecten al funcionamiento de su máquina y que no sean atribuibles a un defecto de fabricación.
- Arañazos, rasguños, abrasiones, golpes, caídas, etc, provocadas por un mal cuidado.
- Defectos en el aparato causados por daños en el transporte del mismo.

4. VIA DE RECLAMACIÓN

- La acción para reclamar por falta de conformidad prescribe a los tres años desde la entrega del bien.
- El consumidor debe informar de la existencia del defecto en el plazo de 2 meses a contar desde que tuvo conocimiento de su existencia.
- Esta Garantía no afecta a otros derechos legales del consumidor, conforme a la legislación vigente, si bien es incompatible con el ejercicio de otras acciones derivadas del saneamiento por vicios ocultos en la compraventa..
- Para cuantas cuestiones puedan surgir con motivo de la interpretación o ejecución de la presente garantía, se estará a lo establecido en la legislación nacional que sea de aplicación.

Cualquier discrepancia que pudiera surgir de la interpretación, validez y ejecución de este contrato, será los juzgados y tribunales de la ciudad de Vitoria.


Certificados

Por medio de la presente Exercycle S.L., como distribuidor de Cosmobelle, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2004/108/CE y 2006/95/CE.


Despiece

Es


2 Manípulo

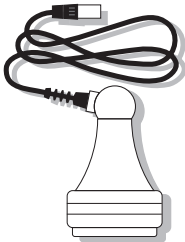

16 Cable de conexión a la red

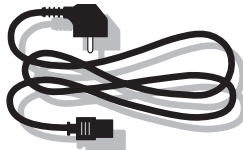

G01 Cuerpo central

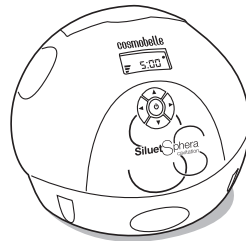

Para pedir un repuesto indicar:

Modelo de la máquina	Nº correspondiente a la pieza	Cantidad
----------------------	-------------------------------	----------

Ejemplo:

CB1100	16	1
--------	----	---

Especificaciones técnicas

Peso Neto: 2.1 kg

Dimensiones (largo x ancho x alto): Largo 25 cm x Ancho 24 cm x Alto 22 cm

F. Ultrasonidos: 40 Khz

Potencia de salida: 5 a 20 W (según programa)

Fuente de alimentación:

- Frecuencia: 50 Hz.
- Voltaje: AC 220 V.

cosmobelle



cavitation
your silhouette is up to you

MANUAL DO UTILIZADOR

Parabéns! Em primeiro lugar, gostaríamos de lhe agradecer por ter comprado o SILUET SPHERA e pela confiança que deposita em nós. Através deste prático Manual do Utilizador e seguindo as suas instruções simples, conseguirá obter resultados comparáveis aos que obteria nas mãos de um profissional de beleza.

Recomendamos-lhe vivamente que leia este Manual do Utilizador com atenção. A sua leitura e compreensão irão ajudar a utilizar o SILUET SPHERA de forma eficaz e segura.

CONTEÚDOS

CAPÍTULO 1

- conteúdo da embalagem

CAPÍTULO 2

- características básicas do SILUET SPHERA
- instruções de utilização

CAPÍTULO 3

- modos de aplicação

CAPÍTULO 4

- para uma correcta e segura aplicação do SILUET SPHERA

CAPÍTULO 5

- perguntas frequentes sobre o SILUET SPHERA

CAPÍTULO 6

- informação importante de segurança
- peças
- certificados
- garantia
- especificações técnicas


CAPÍTULO 1

Conteúdo da caixa


Nesta caixa encontrará tudo o que precisa para poder desfrutar do SILUET SPHERA imediatamente. Verifique atentamente todos os elementos que a embalagem deve conter na seguinte lista.

- Manual do utilizador
- DVD
- Corpo central
- Manípulo
- Cabo de ligação à rede
- Gel de Cavitação
- Loção pós-cavitação

Corpo central

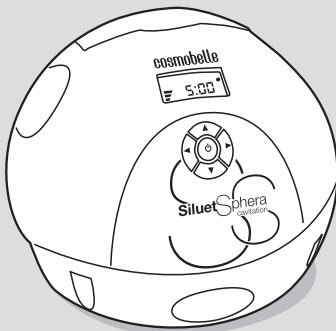

Manípulo

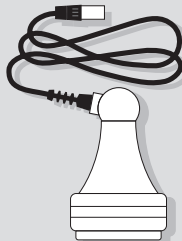


Manual do utilizador



DVD



Cabo de ligação à rede

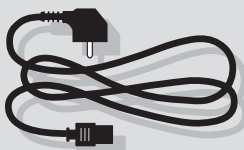

Gel de Cavitação



Loção pós-cavitação



CAPÍTULO 2

Características básicas do Siluet Sphera

O SILUET SPHERA é um dispositivo de alta tecnologia que nos permite eliminar de forma selectiva e eficiente as acumulações de gordura localizada (celulite e pele de laranja) do nosso corpo.

A tecnologia utilizada é a de emissão de ultra-sons, um fenómeno conhecido como a cavitação, que provoca a eliminação das células de gordura.

Esta tecnologia de resultados visíveis é largamente utilizada em centros de estética em todo o mundo para combater a celulite de forma indolor e não invasiva.

Pt

Características do modelo SILUET SPHERA

- Tiempo: Programável de 1 a 15 minutos.
- Intensidad: Programável em 6 níveis de intensidade.

Nesta unidade só deverá preocupar-se em programar as duas funções de forma simples: intensidade e tempo.

Com a intensidade controlamos o nível de penetração das ondas sonoras na pele. Quanto mais intensidade utilizar, maior será a profundidade que atingem as ondas.




A função tempo ajudará a programar os minutos durante os quais deseja utilizar o SILUET SPHERA. Por razões de segurança, o tempo que pode programar será de até 15 minutos: o tempo correspondente ao tempo máximo recomendado para modelar uma zona. No entanto, poderá reduzir esse tempo máximo em intervalos de 1 minuto. Depois de o tempo seleccionado terminar, o SILUET SPHERA emitirá um aviso sonoro.

Instruções de utilização do Siluet Sphera

Precauções: Antes de começar a utilizar este aparelho, consulte o seu médico. Esta advertência é especialmente importante para pessoas com problemas de saúde. A sua utilização não é recomendável para menores de 18 anos. Mantenha este aparelho fora do alcance das crianças.

Funcionamento

- Devemos ligar o manípulo à unidade central. Para isso, pegamos na ficha do manípulo e inserimo-la na ligação situada na unidade central, indicada na Fig. 2.1
- Ligue um terminal do cabo de ligação eléctrica ao conector da máquina e o outro a uma tomada (220 V.) Fig. 2.2
- Coloque o interruptor da máquina na posição (I) para pôr a máquina a funcionar. Fig. 2.3

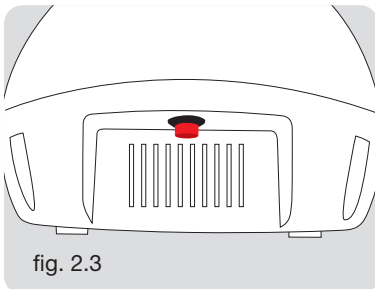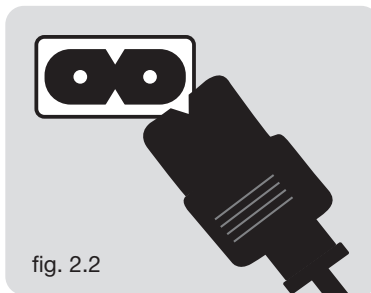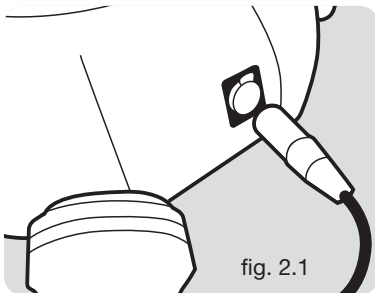

Elementos do monitor

O monitor do SILUET SPHERA é composto por um ecrã e cinco botões.

- No visor é apresentada a informação sobre a sessão de cavitação.
- Os botões possuem as seguintes funções:
 - ▲ e ▼ alteração da intensidade.
 - ◀ e ▶ ajuste do tempo.
 - ⏻ início e fim da sessão.

Sessão de cavitação

As variáveis que intervêm na massagem são 2:

- **Tempo:** mede em minutos e segundos a duração da sessão. Tem a possibilidade de escolher entre 1 e 15 minutos (intervalos de 1 minuto).
- **Intensidade:** representa o nível de intensidade da sessão. O SILUET SPHERA permite seleccionar entre 6 níveis.

Início da sessão

Depois de a máquina estar ligada à corrente eléctrica e o interruptor em funcionamento, verá que após alguns segundos aparecem no monitor, por defeito, os seguintes parâmetros de trabalho:

- Tempo: 5 minutos (5:00)
- Intensidade: nível 3 (3 traços)

A partir daqui, poderá modificar os parâmetros tempo e intensidade para programar a sessão desejada da seguinte forma:

Variação do tempo da sessão

Depois de ver no ecrã os parâmetros seleccionados por defeito, pode modificar a duração da sessão com os botões ◀ e ▶.

O valor que aparece por defeito é 5:00 (5 minutos), mas pode ser modificado em intervalos de 1 minutos entre os valores 1:00 e 15:00.

Variação da intensidade da massagem

Depois de seleccionar o tempo desejado poderá configurar a intensidade. Para isso, deve premir os botões ▲ e ▼.

O nível de intensidade que aparece por defeito ou o da última sessão podem ser modificados seleccionando os níveis 1 e 6 (1 a 6 traços). A intensidade pode ser alterada durante o funcionamento, premindo os botões ▲ e ▼.

Finalmente, segure firmemente o manípulo e coloque-o na zona que deseja modelar, premindo o botão central ⏻ para dar início à sessão. O botão mudará de cor (de azul para cor-de-rosa) e ouvirá um sinal sonoro. Massage como se indica no DVD ou nos “modos de aplicação” descritos mais à frente neste mesmo manual.

Se desejar interromper a sessão, basta premir novamente o botão central ⏻ e este parará a sessão, voltando o contador ao tempo seleccionado previamente.

Quando o contador do tempo chegar a **0:00**, a unidade interromperá o tratamento e emitirá um sinal sonoro para avisar que terminou a sessão seleccionada. O contador voltará ao tempo seleccionado previamente.

CAPÍTULO 3

Modos de aplicação do Siluet Sphera

Aplique sempre o gel de forma abundante na zona que desejar modelar e comece a tratá-la deslizando o manípulo lentamente e sem apertar, tal como mostram as imagens.

Se precisar de adquirir o gel ou algum dos nossos cremes de pré-cavitação poderá fazê-lo no estabelecimento onde comprou o SILUET SPHERA ou consultar outros pontos de venda na página Web: www.cosmobelle.com

Em cada um dos pontos seguintes encontrará um quadro com os protocolos de utilização. Antes de começar a utilizar o aparelho, deverá determinar em que nível de gordura se encontra cada zona que vai tratar.


- A** Grande acumulação de gordura de densidade alta
- B** Grande acumulação de gordura de densidade média
- C** Acumulação média de gordura de densidade média
- D** Pequena acumulação de gordura
- E** Pele de laranja
- F** Sessão de manutenção

Pt

Abdómen central

Relembre-se de que nunca deve aplicar o SILUET SPHERA no umbigo, peito, zona torácica e zona genital.

Aplique gel de forma abundante no abdómen e comece a modelar a zona, deslizando o manípulo lentamente e sem apertar, tal como demonstrado nas imagens.

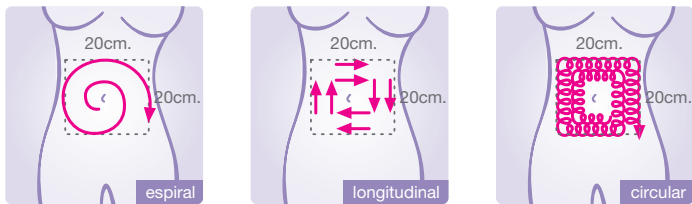

Para obter um melhor resultado, recomendamos que aplique o SILUET SPHERA combinando várias técnicas de massagem (espiral, longitudinal e circular) em sessões diferentes. Recomendamos que se encoste para que a aplicação do SILUET SPHERA seja mais confortável.

Nível	Intensidade	Tempo
A	6	10'
B	5	10'
C	4	10'
D	3	8'
E	3	8'
F	2	8'

Cintura

Aplique gel na pele da zona a modelar com o SILUET SPHERA.




Tanto a massagem circular como a massagem longitudinal deverão ser aplicadas de cima para baixo, tal como mostram as imagens. É importante respeitar o sentido da massagem, uma vez que favorece a drenagem. Combine as várias técnicas de massagem em diferentes sessões.

Nível	Intensidade	Tempo
A	5	10'
B	5	10'
C	4	10'
D	3	8'
E	3	5'
F	3	5'

Ancas

Aplique gel na zona a modelar com o SILUET SPHERA.

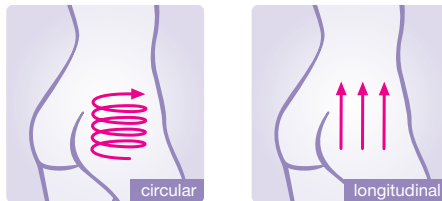


Tanto a massagem circular como a massagem longitudinal deverão ser aplicadas de baixo para cima, tal como mostram as imagens. Durante o tratamento, insista na zona de maior acumulação de gordura.

Nível	Intensidade	Tempo
A	5	8'
B	5	8'
C	5	8'
D	4	8'
E	3	5'
F	3	5'

Glúteos

Aplique gel na zona a modelar com o SILUET SPHERA.

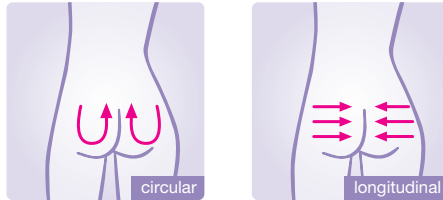


Tanto a massagem longitudinal como a circular deverão ser realizadas de acordo com o sentido das setas, tal como mostram as imagens.

Nível	Intensidade	Tempo
A	6	10'
B	6	10'
C	6	8'
D	5	8'
E	4	10'
F	4	10'

Interior da coxa

Relembre-se de que nunca deve aplicar o SILUET SPHERA do joelho até ao pé, uma vez que nessa zona não são produzidas acumulações significativas de gordura.

Aplique gel na zona a modelar com o SILUET SPHERA.

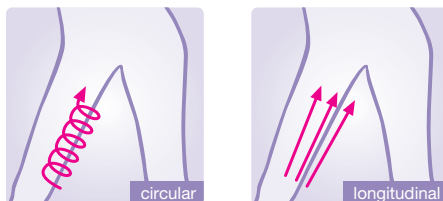


Tanto a massagem longitudinal como a circular deverão ser realizadas de baixo para cima, tal como mostram as imagens. Seguir estas instruções contribuirá para melhorar os resultados.

Nível	Intensidade	Tempo
A	5	10'
B	4	10'
C	3	10'
D	3	8'
E	2	8'
F	2	8'

Interior do joelho

Relembre-se de que não deve aplicar SILUET SPHERA nas articulações dos joelhos.

Aplique gel na zona a modelar com o SILUET SPHERA.


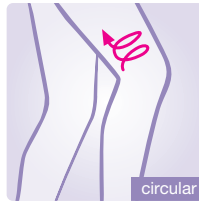


Nesta zona aplicaremos uma leve massagem circular, tal como se mostra na imagem.

Nível	Intensidade	Tempo
A	2	10'
B	2	10'
C	2	8'
D	2	8'
E	2	8'
F	2	8'

Braços

Relembre-se de que nunca deve aplicar o SILUET SPHERA na zona das mãos, antebraço ou articulações.

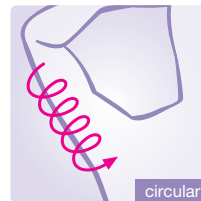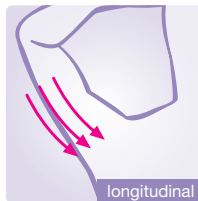

Certifique-se de que aplica o gel de forma generosa na zona que vai modelar, já que melhorará a eficácia do tratamento e evitará danificar a máquina.

Realize a massagem, deslizando o manipulador lentamente e sem apertar. A massagem desta zona deverá ser sempre aplicada em direcção ao corpo, tal como mostra a imagem.

Nível	Intensidade	Tempo
A	2	8'
B	2	8'
C	2	5'
D	2	3'
E	2	3'
F	2	5'

CAPÍTULO 4

Para uma correcta e segura aplicação de Siluet Sphera

Pt

Para uma correcta e segura aplicação do SILUET SPHERA deve ter em conta os seguintes tempos de aplicação:

- **POR ZONA DE MODELAÇÃO: 15 minutos no máximo.**

Entendemos por “zona de trabalho” cada uma das partes do nosso corpo nas quais podemos aplicar o SILUET SPHERA. As diferentes zonas de modelação são: os braços, o abdómen, a cintura, as ancas, o interior das coxas e o interior dos joelhos.

Ex.: numa mesma sessão poderá realizar a aplicação do SILUET SPHERA durante 15 minutos na cintura e 15 minutos nos braços. Porém, NUNCA deverá realizar no mesmo dia uma sessão de 30 minutos de aplicação só na cintura.

- **POR SESSÃO: 30 minutos no máximo.**

Entendemos por sessão a aplicação do SILUET SPHERA no mesmo dia em 2 zonas de modelação diferentes (máximo de 15 minutos por zona).

- **ENTRE SESSÕES: 72 horas no mínimo.**

Entendemos por “entre sessões” o tempo que deve decorrer entre duas sessões. *Ex.: numa semana, uma planificação de sessões (a máxima) seria: segunda-feira, quinta-feira e domingo.*

- **DEPOIS DE 20 SESSÕES: deverá descansar durante 3 semanas.** Após esse período poderá repetir completamente o primeiro tratamento, ou então começar o programa de manutenção.
- **SESSÕES DE MANUTENÇÃO:** depende de cada indivíduo, mas em princípio uma sessão por mês é suficiente.

MUITO IMPORTANTE

***** Nunca ultrapasse os tempos de aplicação (15 minutos por zona, 30 minutos no total no fim do dia).** O seu corpo não sabe “onde” é que está a eliminar a gordura, pelo que não pode realizar numa sessão aplicações de 15 minutos na cintura, 15 minutos nas pernas e 15 minutos nos braços, etc. **LEMBRE-SE:** no total, o tempo máximo num dia, juntando todas as partes do corpo a tratar, deve ser de 30 minutos.

***** E, sobretudo, respeite o tempo de descanso de 72 horas entre sessões.** É o tempo de que o seu corpo precisa para eliminar através do sistema linfático toda a gordura que foi dissolvida durante a sessão.

CAPÍTULO 5

Perguntas frequentes

O que é a cavitação?

A cavitação é uma técnica não invasiva (sem cirurgia) para modelar o corpo, que reduz o volume, eliminando a celulite e os depósitos de gordura localizada no abdómen, ancas, cintura, braços e na parte interna das coxas e joelhos.

Quais são as vantagens em relação aos outros métodos?

A vantagem fundamental é que podemos escolher as zonas específicas do corpo que queremos modelar. Podemos dizer que é uma tecnologia que nos permite reduzir a celulite de forma selectiva.

A cavitação é dolorosa?

A utilização do SILUET SPHERA nunca deve provocar dor.

É normal ouvir um pequeno zumbido durante a utilização do SILUET SPHERA?

Sim, alguns utilizadores poderão ouvir um pequeno zumbido durante a sua aplicação.

Pode ser utilizado em todas as partes do corpo?

Não se pode aplicar a todas as partes do corpo. Em nenhum caso deve ser aplicado na cabeça, no rosto, no pescoço, nos seios, na zona torácica, umbigo, antebraço, articulações, órgãos genitais, costas, tornozelos e gânglios.

Com o SILUET SPHERA perde-se peso ou volume?

O SILUET SPHERA elimina as acumulações de massa gorda, reduzindo o peso. Graças ao seu desaparecimento, o nosso corpo também perde volume.

O SILUET SPHERA é eficaz no tratamento da pele de laranja?

Sim, o SILUET SPHERA é eficaz com a pele de laranja, dado que destrói as células adiposas que provocam o armazenamento da gordura.

O SILUET SPHERA serve para eliminar as rugas?

O SILUET SPHERA não é um sistema criado para a eliminação de rugas.

O SILUET SPHERA pode ser utilizado no rosto?

O SILUET SPHERA NUNCA deve ser utilizado no rosto, olhos ou pescoço.

A partir de quantas sessões se começam a notar resultados?

Deverá observar resultados a partir das primeiras cinco sessões, no entanto, os resultados podem variar em função do indivíduo.

Quantos dias devo esperar entre duas sessões?

Recomenda-se que deixe passar 72 horas entre duas sessões.

A celulite volta a aparecer depois de utilizar o SILUET SPHERA?

Ainda que o SILUET SPHERA assegure uma eficácia duradoura, não podemos garantir que não volta a aparecer. Para evitar o reaparecimento de celulite recomenda-se uma dieta equilibrada, beber muita água, a prática regular de exercício físico e sessões de manutenção com o SILUET SPHERA.

Tem efeitos secundários?

Se for uma pessoa saudável, o SILUET SPHERA não tem nenhum efeito secundário descrito; no entanto, nalgumas pessoas, pode produzir uma vermelhidão na pele que poderá durar cerca de 2 horas.

É necessário combinar o SILUET SPHERA com alguma dieta?

Não é necessário seguir nenhuma dieta especial; porém, é altamente recomendável ter uma alimentação equilibrada e hidratar-se convenientemente.

Quanta água devo beber?

É imprescindível começar a hidratar-se duas horas antes de aplicar o SILUET SPHERA. Também é aconselhável continuar a hidratar-se após o tratamento. Recomenda-se ingerir pelo menos 2 litros durante estes períodos, uma vez que ajudam a eliminar toxinas.

É necessário combinar o SILUET SPHERA com a prática desportiva?

Não é estritamente necessário, mas a prática de pelo menos 30 minutos de qualquer actividade física potencia os resultados, pois contribui para a drenagem de líquidos.

Que práticas desportivas são compatíveis com o SILUET SPHERA?

A plataforma vibratória é o complemento ideal pelas suas qualidades tonificantes e drenantes. No entanto, se não tiver acesso à plataforma, um passeio, bicicleta estática, natação ou outro exercício aeróbico realizado durante pelo menos 30 minutos são uma grande ajuda.

Como posso potenciar os efeitos do SILUET SPHERA?

Aliando uma dieta equilibrada à prática habitual de desporto e à ingestão abundante de água. Além disso, as massagens de drenagem são uma grande ajuda.

Posso utilizar o SILUET SPHERA sem aplicar gel?

NUNCA, uma vez que o gel actua como agente condutor dos ultra-sons no corpo. Se não utilizarmos gel, a aplicação do SILUET SPHERA perde a sua eficácia e a máquina pode ficar seriamente danificada.

Posso utilizar qualquer tipo de gel?

Recomendamos que utilize unicamente o gel COSMOBELLE, dado que a utilização de qualquer outro poderá danificar a máquina.

Em que situações é contraindicada a utilização do SILUET SPHERA?

- Se estiver grávida ou pensar que está grávida.
- Se estiver em período de amamentação.
- Tratamentos de fertilidade.
- Se possuir uma cardiopatia de qualquer tipo.
- Se tiver problemas dermatológicos.
- Osteoporose.
- Fibromialgia.
- Tumores malignos.
- Hipertensão.
- Níveis de colesterol elevados.
- Insuficiências renais.
- Insuficiências físicas.
- Implantes metálicos ou próteses.
- Implantes auditivos.
- Malformações físicas.
- Epilepsia.
- Tratamento prolongado com medicamentos: anti-inflamatórios, anticoagulantes, antibióticos ou anti-histamínicos.
- Depressão.
- Tratamento psiquiátrico ou psicológico.
- Problemas hepáticos (fígado gordo), entre outros.
- Cólon irritável.
- Diabetes.

Posso utilizar o SILUET SPHERA se estiver grávida?

NUNCA deve utilizar o SILUET SPHERA se estiver grávida ou pensar estar grávida.

Posso utilizar o SILUET SPHERA durante a amamentação?

Não utilizar durante o período de amamentação.

Posso aplicar o SILUET SPHERA nos seios?

NUNCA deve ser aplicado nos seios.

Posso utilizar o SILUET SPHERA durante a menstruação?

A sua aplicação não é recomendável durante esse período na zona abdominal, dado que pode provocar um aumento da hemorragia. No entanto, pode ser aplicado nas outras zonas.

Posso utilizar o SILUET SPHERA se tiver um DIU?

Sim.

Posso utilizar o SILUET SPHERA na pele tatuada?

Não. Deve evitar passar o manípulo nas zonas tatuadas.

Posso utilizar o SILUET SPHERA se tiver implantes (pregos, etc.)?

Pode utilizar o SILUET SPHERA se tiver implantes, sempre e quando NÃO massajar estas zonas: por exemplo, se o implante estiver no joelho, não haverá problema se massajar o abdómen. Também não haverá problema se o implante estiver nas costas, já que nunca deve utilizar SILUET SPHERA nesta parte do corpo.

O SILUET SPHERA pode afectar os meus níveis de colesterol?

A utilização do SILUET SPHERA pode aumentar os seus níveis de colesterol.

O SILUET SPHERA pode ser utilizado com problemas de pele?

Não o deve utilizar se tiver um problema de pele. Consulte o seu médico.

Posso utilizar o SILUET SPHERA se tiver implantes auditivos?

Não deve ser utilizado se tiver implantes auditivos.

Posso utilizar o SILUET SPHERA no duche ou no banho?

Em nenhuma circunstância o manípulo ou a máquina devem entrar em contacto com água, uma vez que existe o risco de choque eléctrico.

Como devo limpar o SILUET SPHERA e o manípulo?

Para limpar o SILUET SPHERA ou o manípulo, nunca os mergulhe em água. Utilize um pano ligeiramente humedecido com água.

CAPÍTULO 6

Informação importante de segurança

Não modifique a ficha que vem no aparelho. Se não encaixar na tomada eléctrica, solicite a um electricista a instalação de uma tomada adequada.

Este produto deve ser utilizado num circuito de 220-240 V e tem uma ficha de terra semelhante à que se mostra na **Fig. 5.1**

Siga estas recomendações:

1. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
2. Não utilize a máquina com o cabo eléctrico danificado ou desgastado.
3. Mantenha o cabo eléctrico afastado de superfícies quentes.
4. Nunca utilize a máquina ao ar livre.
5. Para retirar a ficha, coloque o interruptor na posição «0» e retire a ficha da tomada.




Protecção

Este modelo é dotado de uma protecção electrónica de interrupção automática para uma óptima conservação dos circuitos electrónicos e eléctricos.

Esta protecção activar-se-á (fusível) se a unidade for submetida a um esforço ou aquecimento anormal.

Se isto ocorrer:

1. Desligue a unidade da rede eléctrica
2. Coloque o interruptor (L), situado na parte lateral da máquina, na posição «0» (OFF) **fig. 5.2**
3. Retire a capa da máquina
4. Substitua o fusível (1 Amp) que se encontra dentro do porta-fusíveis situado ao lado do conector do cabo de rede **fig. 5.3**
5. Ligue a unidade a uma ficha. Coloque o interruptor (L) em posição «I» (ON) **fig. 5.2**

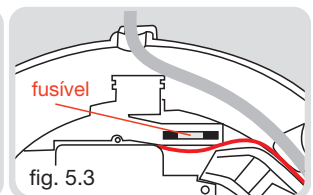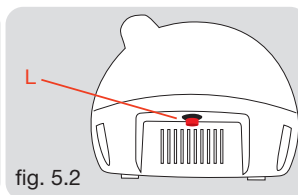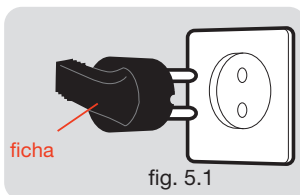

Garantia

Sugerimos que leia atentamente este exemplar para conhecer com exactidão a cobertura da garantia outorgada pelo fabricante e as suas responsabilidades enquanto proprietário.

Garantias

INFORMAÇÃO GERAL

A EXERCYCLE, S.L., enquanto distribuidor da Cosmobelle, deseja agradecer-lhe pela compra deste produto e pela confiança que deposita em nós. Os nossos produtos foram submetidos a um controlo de qualidade rigoroso. No entanto, se tiver algum problema com este aparelho durante o período de garantia, pedimos-lhe que leia atentamente as condições de garantia e que contacte o distribuidor autorizado da sua zona.

O presente certificado de garantia foi redigido em conformidade com o disposto na Directiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Maio de 1999, sobre determinados aspectos da venda e garantia dos bens de consumo, incorporada no direito espanhol através da Lei 23/2003, de 10 de Julho, sobre garantias na venda de bens de consumo.

Neste sentido, a EXERCYCLE, S.L., com NIF B-01029032 e domicílio em Vitória, calle Zurrupitieta, 22, garante este produto nos seguintes termos e condições:

1. PERIODO DE GARANTIA

O produto coberto por este certificado está protegido durante um período de DOIS (2) ANOS, a contar da entrega do produto, entendendo-se por tal a data que figura no recibo ou factura justificativa da compra do produto, ou na nota de entrega correspondente, se esta for posterior. É imprescindível, para eventuais reparações, a apresentação da mesma. A política em relação ao período de garantia pode variar em função dos países. O período de garantia indicado só é aplicável na Europa.

2. DIREITOS COBERTOS PELA GARANTIA

- Reparação ou substituição do produto que, se tal for o caso, será levada a cabo dentro de um prazo razoável e sem inconvenientes maiores para o consumidor, sendo tida em conta a natureza do produto e a finalidade que tinha para o consumidor.
- Ficam excluídos os casos nos quais a reparação ou substituição imponha ao vendedor custos que não sejam razoáveis em comparação com outras formas de indemnização, quando estas não prejudicarem o consumidor.
- As reparações serão gratuitas para o consumidor a nível da mão-de-obra, deslocação e materiais.
- No caso de reparação ou substituição de uma máquina por outra nova, o prazo de garantia fica suspenso até à entrega desse novo aparelho, tendo sempre 6 meses de garantia no mínimo, mas em nenhum caso será iniciado um novo período de 2 anos.

- Assim, produzir-se-á uma (i) redução do preço ou proceder-se-á à (ii) rescisão do contrato, conforme o consumidor escolher, quando a reparação ou substituição não forem levadas a cabo dentro de prazo razoável ou sem inconvenientes maiores para o consumidor. A (i) redução do preço será proporcional à diferença existente entre o valor que o bem tinha no momento da entrega e em conformidade com o contrato e o valor que o bem efectivamente entregue tinha no momento da referida entrega. A (ii) rescisão não terá lugar quando a falta de conformidade tiver pouca importância.

3. A GARANTIA NÃO COBRE

- Defeitos atribuíveis a uma utilização diferente da estabelecida no Manual do Utilizador.
- A utilização a título profissional ou o aluguer a título comercial do produto.
- A má instalação, montagem incorrecta ou peças danificadas provocadas por uma montagem inadequada (rever o Manual do Utilizador onde são descritas as recomendações para a instalação e utilização da máquina).
- A utilização indevida do produto (utilizar sem aplicação de gel, exceder os tempos de utilização, exposição à humidade demasiado elevada, etc.) ou problemas resultantes de uma falta de manutenção (acumulação de sujidade em qualquer parte do produto ou dos seus acessórios, etc.) (rever o Manual do Utilizador onde são descritas as recomendações para a instalação e utilização do produto).
- Reparações realizadas por pessoal não autorizado pela EXERCYCLE, S.L. ou aparelhos abertos ou manipulados por pessoas não autorizadas pelo fabricante.
- Desvios do produto standard, tais como ligeiras vibrações, ruídos ou peças danificadas que não afectem o funcionamento da sua máquina e que não sejam atribuíveis a um defeito de fabrico.
- Arranhões, riscos, abrasões, golpes, quedas, entre outros, provocados por falta de cuidado.
- Defeitos no aparelho causados por danos no transporte do mesmo.

4. VIA DE RECLAMAÇÃO

- A acção para reclamar por falta de conformidade prescreve três anos depois da entrega do produto.
- O consumidor deve informar a empresa da existência de defeito no prazo de 2 meses a contar do momento em que teve conhecimento da sua existência.
- Esta Garantia não afecta outros direitos legais do consumidor, em conformidade com a lei vigente, ainda que seja incompatível com o exercício de outras acções resultantes da indemnização por defeitos ocultos na compra.
- As questões que possam surgir da interpretação ou execução da presente garantia serão esclarecidas pela legislação nacional a aplicar nesse caso.

Qualquer discrepância que possa surgir da interpretação, validade e execução deste contrato, será avaliada pelas autoridades competentes e tribunais da cidade de Vitória.

Certificados

Através da presente, a Exercycle S.L., enquanto distribuidor da Cosmobelle, declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis das Directivas 2004/108/CE e 2006/95/CE.


Peças

Pt


2 Manípulo



16 Cabo de ligação à corrente eléctrica

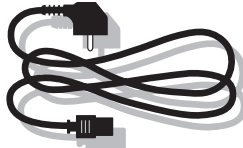

G01 Unidade central

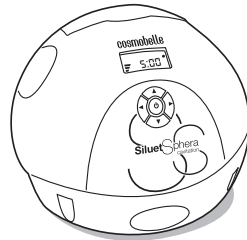

Para pedir uma peça de substituição, por favor indique:

Modelo
da máquina

Nº correspondente
à peça

Quantidade

Ejemplo:

CB1100	16	1
--------	----	---

Especificaciones técnicas

Peso Líquido: 2,1 kg.

Dimensões (comprimento x largura x altura): 25 x 24 x 22 cm

F. Ultra-sons: 40 KHz

Potência de saída: 5 a 20 W (de acordo com o programa)

Fonte de alimentação:

- Frequência: 50 Hz
- Voltagem: AC 220 V

cosmobelle



CB1100

Fecha de compra / Data de compra

Comprado en / Comprado em

Datos del comprador / Dados do comprador

Sello del distribuidor / Carimbo do distribuidor

Por favor, conserve la factura como comprobante de compra /
Por favor, conserve a factura como prova de compra

Distribuido por / Distribuído por:

TECNOVITA BY BH

c/ Perretagana, 10 · C.T.V. Júndiz • 01015 VITORIA (Spain)

Tel.: +34 945 15 88 18 • Fax: +34 945 15 78 43

e-mail: info@bhwellness.es

SERVICIO POST-VENTA ESPAÑA

Tel.: +34 945 292 012 / 902 170 258 • Fax: +34 945 56 05 27

MAQUINASPORT, S.A.

Z.I. Assequins s/n • Giesteira Terreirinho • 3750-325 ÁGUEDA

(Portugal) • Tel.: +351 234 729 510 • Fax: +351 234 729 519

e-mail: info@bhfitness.pt

SERVIÇO PÓS-VENDA PORTUGAL

Tel.: +351 707 22 55 24 • Fax: +351 234 729 519

e-mail: info@bhfitness.pt

www.cosmobelle.com